



PRODUKT
KATALOG



AMT Kreienbaum

Die **AMT Kreienbaum GmbH** ist ein neu gegründetes Joint Venture für den Vertrieb von Produkten im Bereich der enteralen Ernährung und der Chirurgie. Mit den beiden bodenständigen und erfahrenen Familienunternehmen Applied Medical Technology und KREIENBAUM Neoscience im Hintergrund sehen wir großes Potenzial für weiteres Wachstum.

Applied Medical Technology, Inc. ist ein global führender Hersteller chirurgischer Hilfsmittel und innovativer Medizinprodukte für die enterale Ernährung. Wir stellen seit über 30 Jahren höchste Anforderungen an die Leistungsfähigkeit und Qualität der von uns produzierten Artikel. Das klare Ziel unserer Entwicklungen besteht immer darin, dem Anwender/Patienten ein „Plus“ an Lebensqualität zu geben.

KREIENBAUM Neoscience ist exklusiver Vertriebs- und Dienstleistungs-partner für hochwertige Medizinprodukte und -technik, speziell im Bereich Neonatologie und Pädiatrie. Unsere Produkte zeigen die enge Zusammen-arbeit unserer Mitarbeiter/-innen mit Experten aus Krankenhäusern, Univer-sitäten und Instituten. Darüber hinaus sind sie Ausdruck des ausgeprägten Service-Gedankens, der unsere Arbeit in jeder Hinsicht bestimmt.

Inhaltsverzeichnis


| | |
|---|----|
| Bridle Pro® | 4 |
| micro G-JET® | 8 |
| G-JET® Button | 12 |
| Traditioneller G-JET® | 16 |
| MiniONE® Balloon Button | 18 |
| MiniONE® Capsule Non-Balloon Button | 22 |
| Klassische Gastro-Tubes | 24 |
| Set für die Erstanlage von PEG-Sonden | 28 |
| CINCH® | 30 |
| Zubehör | 32 |
| MiniACE® Button | 34 |
| TLC® Retraktorsysteme | 38 |
| Remora® Rauch- und Flüssigkeitsabsauger | 42 |

Bridle Pro®


Sondenfixierung für transnasale Sonden

Der Bridle Pro® ist eine **einfache und sichere Methode**, um ungewünschtes Herausziehen von transnasalen Sonden zu **vermeiden**. Dank des magnetischen Einführsystems kann der Bridle **innerhalb von wenigen Sekunden** platziert werden, ohne dass es einer Sedierung des Patienten bedarf.

- Reduziert ungewolltes Herausziehen von transnasalen Sonden
- Schnelle und einfache Platzierung durch ein magnetisches Einführsystem
- Hergestellt aus flexilem Silikon und einer stabilen, nicht störenden Befestigungssonde aus Monofilament
- In verschiedenen Größen erhältlich

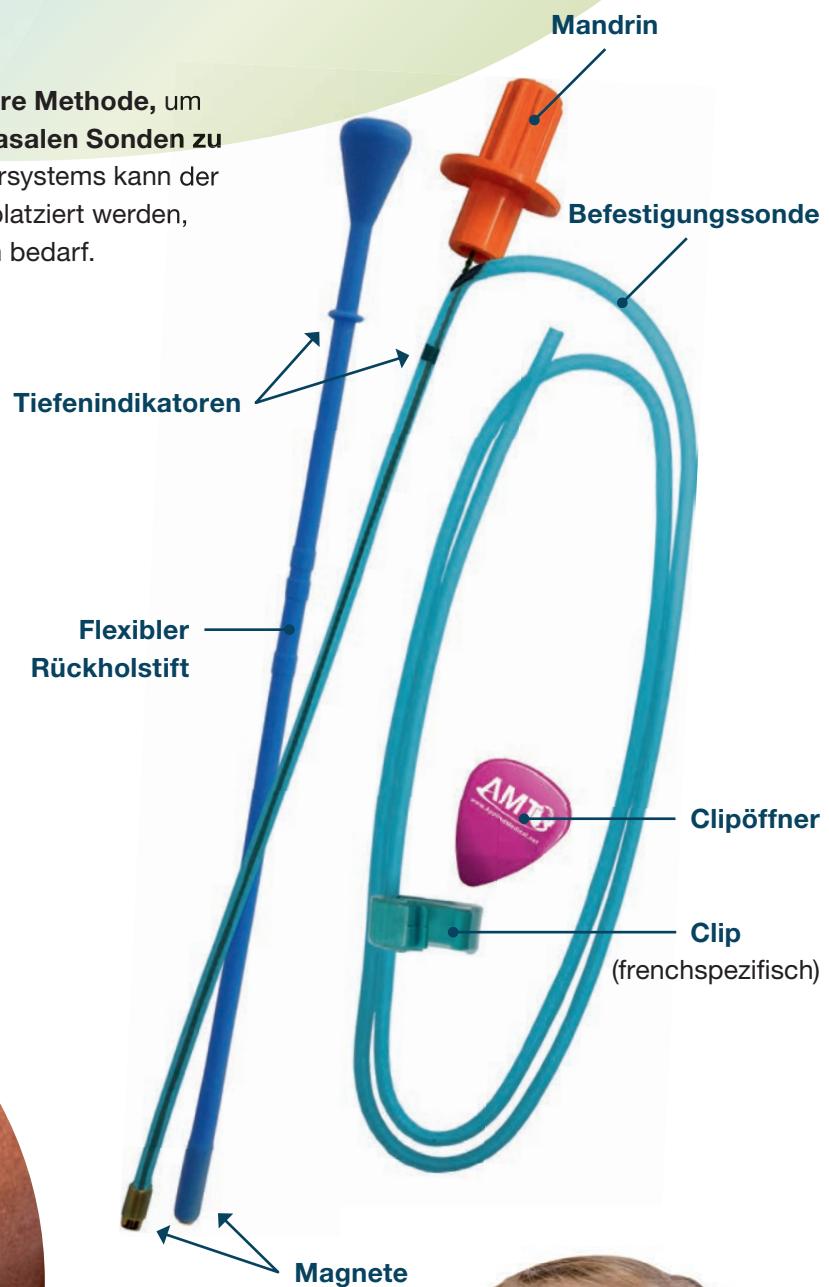

Anwendung

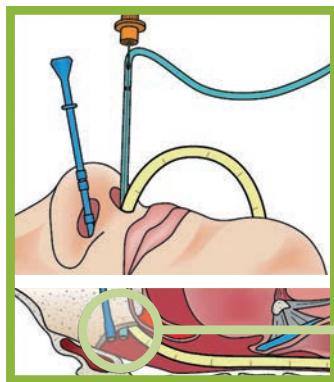


1. Einführen des Bridles und Zusammenführen der Magnete

Führen Sie den flexiblen Rückholstift in das freie Nasenloch ein. Danach führen Sie die Befestigungssonde mit Mandrin in das andere Nasenloch. Achten Sie darauf, dass sich die Tiefenindikatoren auf gleicher Höhe befinden.




Sobald die Magnete verbunden sind, sollten Sie ein „Klick“-Geräusch hören. Um zu testen, ob die Magnete verbunden sind, kann leicht am Rückholstift gezogen werden – die Befestigungssonde sollte sich dann zeitgleich bewegen.

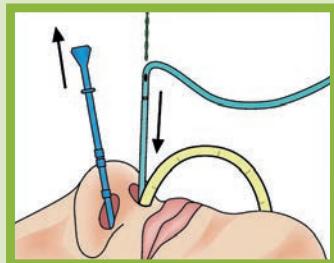


2. Entnehmen des Mandrins und Herausziehen des Rückholstifts

Entnehmen Sie den Mandrin (orangener Griff). Ziehen Sie dann langsam an dem Rückholstift, bis nur noch die Befestigungssonde in der Nase verbleibt. Dies schafft eine Art Schlaufe um den Vomerknochen (Pflugscharbein).

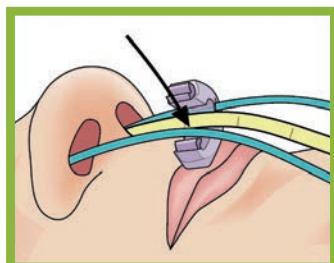

3. Verschließen des Clips

Schieben Sie den Clip bis ca. 1 cm unter die Nase und fixieren Sie nun die Nasensonde, indem Sie die Magensonde und das lose Ende der Befestigungssonde mit in den Clip legen. Schließen Sie den Clip so, dass ein Einrasten zu spüren ist.

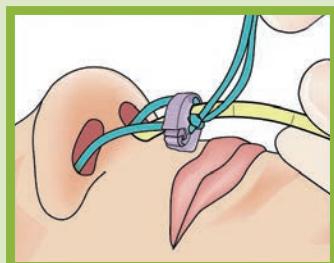

4. Verknoten der Enden

Verknoten Sie die Enden der Befestigungssonde und schneiden Sie die Enden ab.



Entfernen des Bridles

Durchtrennen Sie eine Seite der Befestigungssonde. Ziehen Sie dann die Nasensonde wie gewohnt aus der Nase. Der Clip muss hierfür nicht gelöst werden.

Bridle Pro® – die Vorteile

Jede Platzierung einer Magensonde stellt ein Risiko dar und ist unangenehm für den Patienten. Eine sichere Befestigung von Magensonden kann die **Kalorienzufuhr erhöhen**, die Unterbrechung der Nahrungszufuhr und **unnötige Platzierungen von PEGs oder IV Ernährung vermeiden**. Zudem werden Hautirritationen durch Klebeband verhindert.

Eine schnelle Platzierung des Bridle Pro® durch das medizinische Personal ist gewährleistet, unnötiges Röntgen kann durch die gesicherte Lage der Sonde vermieden werden.



Optimale Nahrungszufuhr

Reduziert Komplikationen verbunden mit:

- **Aspiration**
- **Pneumothorax**
- **Röntgenstrahlung**
- **Sinusitis**
- **Drucknekrose**
- **Unterbrechung der Nahrungszufuhr**


Kosten- und Zeitsparnis

- **Schnelle Platzierung durch Pflegepersonal oder Ärzte**
- **Vermeidung von unnötigem Röntgen durch gesicherte Lage der Sonde**

Ungewolltes Herausziehen ist mit einem Bridle wesentlich unwahrscheinlicher als mit herkömmlichem Tape.*

* Dies ergibt sich aus einer Studie von Gunn S., MD. 2008, University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh PA: „Does a Bridle Prevent Accidental Feeding Tube Removal?“ Hier wurde die Effektivität von Bridles untersucht.

Die Platzierung

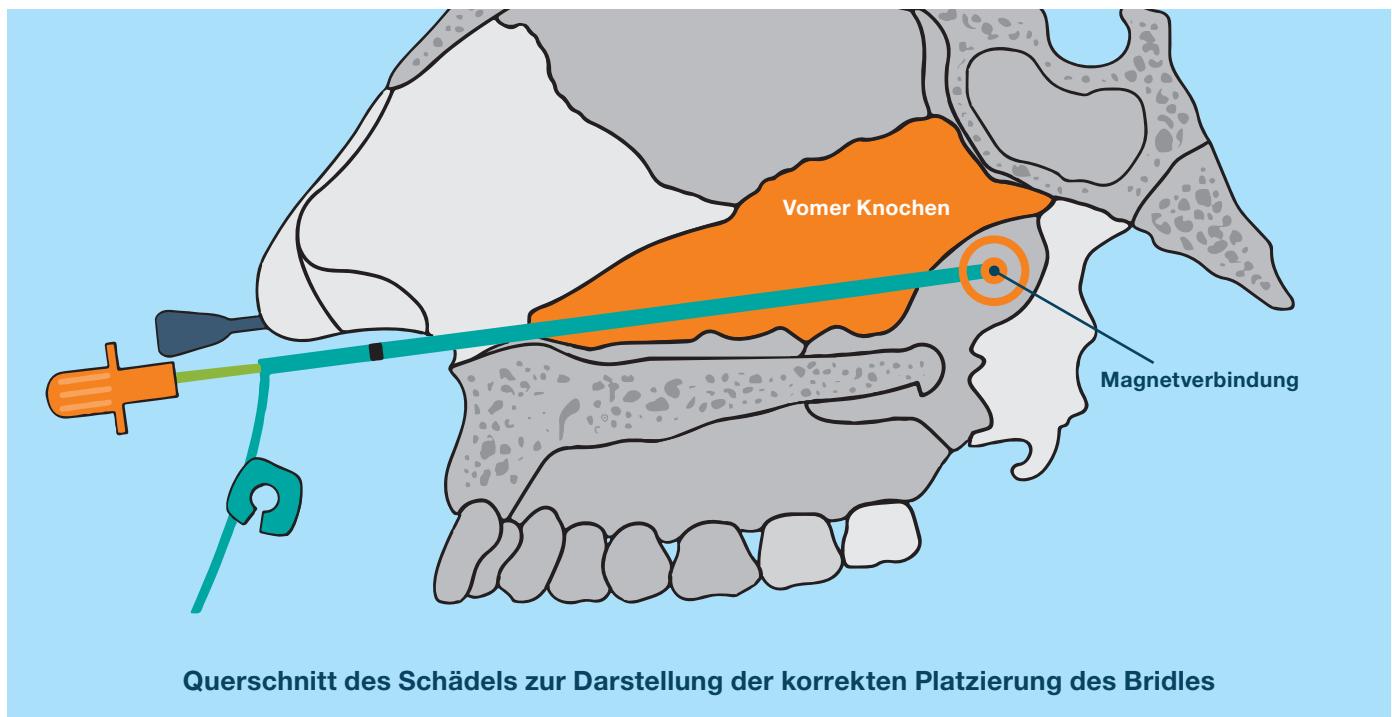

Größen und Artikelnummern

| Clip-Größe in FR | Artikelnummer |
|------------------|---------------|
| 5 - 6 | 4-420506 |
| 8 - 10 | 4-420810 |
| 12 - 14 | 4-421214 |
| 16 - 18 | 4-421618 |
| 8 | 4-4208 |
| 10 | 4-4210 |
| 12 | 4-4212 |
| 14 | 4-4214 |
| 16 | 4-4216 |
| 18 | 4-4218 |

Die Clip-Größe richtet sich nach der Größe der zu fixierenden Sonde.

Pro Range Clips



Pro Clips



Inklusive




micro G-JET®

Pädiatrische Dünndarm-Magensonde


Der micro G-Jet® wurde für pädiatrische Patienten entwickelt und zeichnet sich durch seine einzigartige Verjüngung von 14 Fr im gastrischen Schenkel zu 8 Fr im jejunalen Schenkel aus.

Der 8 Fr jejunale Schenkel ist für das enge Lumen des Dünndarms bei pädiatrischen Patienten geeignet und wurde konzipiert, um Verdauungsprobleme, im Zusammenhang mit einer anhaltenden Pylorusöffnung wie z.B. Rückflüsse in den Magen, zu reduzieren.

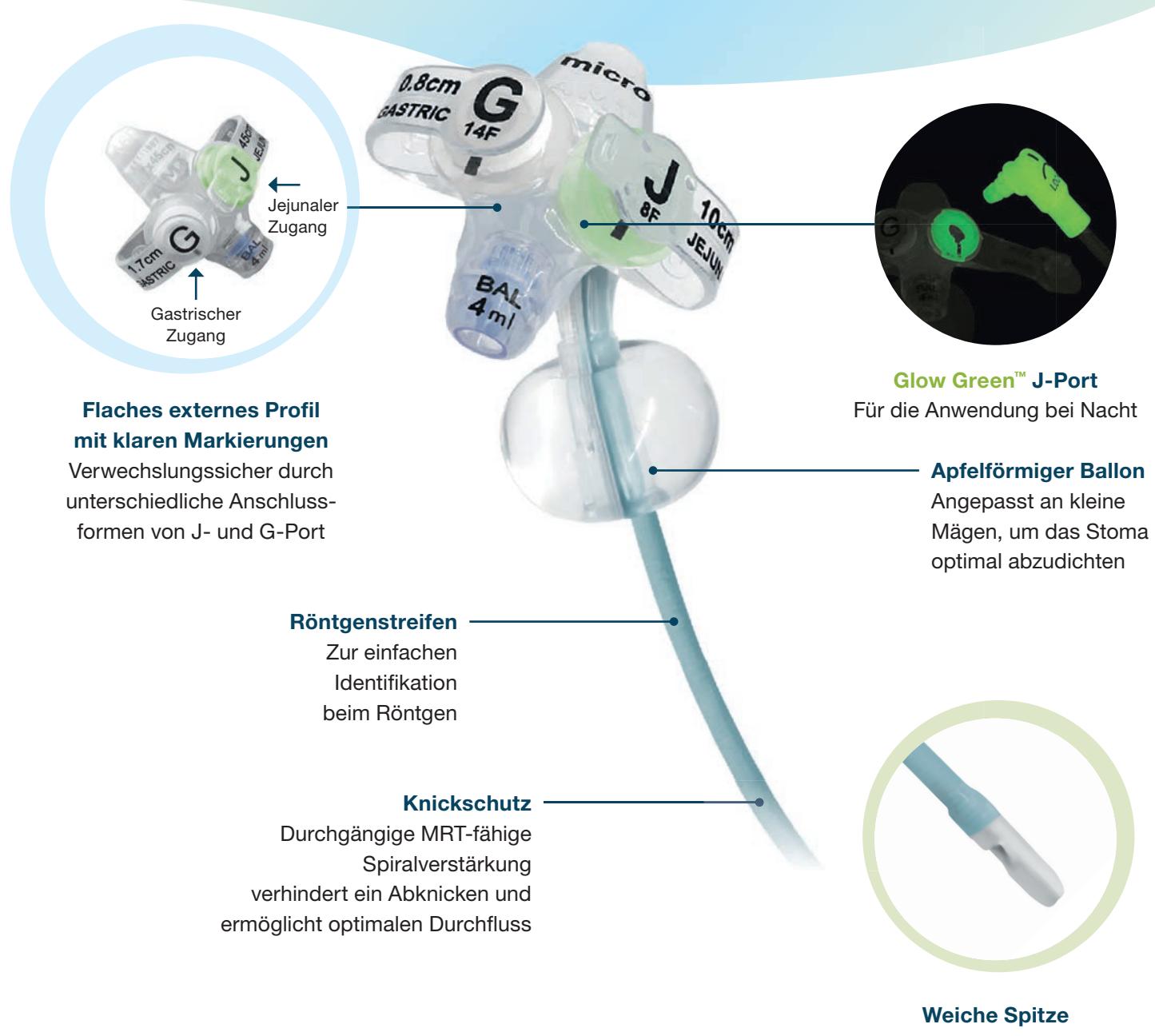

Was macht den micro G-JET® so besonders?

Beim micro G-JET® wurden die **Bedürfnisse der Patienten weiter in den Vordergrund gestellt**, sodass trotz Stoma eine hohe Lebensqualität ermöglicht werden soll.

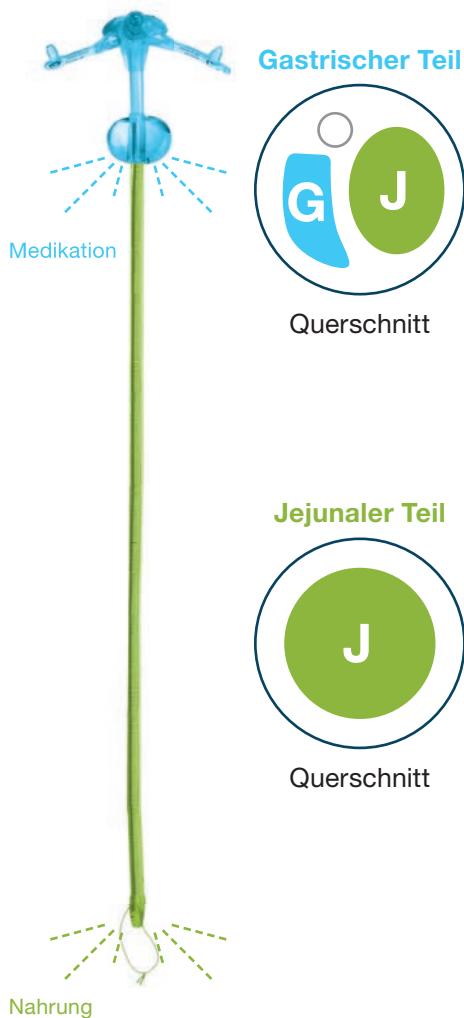

Geringeres Risiko der Sondenverstopfung

Während der micro G-JET® im gastrischen Teil noch doppelumig ist, wird er im jejunalen Teil einlumig. Dies ermöglicht den bestmöglichen Durchfluss und minimiert das Risiko einer Sondenverstopfung.



Dank des beiliegenden Adapters wird das Einführen des Führungsdrähtes für das Legen des micro G-Jet® vereinfacht.

Mehr Sicherheit

Die versehentliche Zuführung von Nahrung in den Magen (statt in das Jejunum) kann ein Risiko bedeuten. Die micro G-JET® Zugänge (gastrisch und jejunal) können durch unterschiedliche Anschlussformen nicht verwechselt werden. **Das Risiko von Fehlverbindungen wird reduziert.** Für jeden Port sind unterschiedliche Ernährungs-/Verlängerungssets erforderlich.



Weißer G-Port

¾ Drehung im Uhrzeigersinn
zum Verbinden mit **gastrischem**
Verlängerungsset (weiß)

Glow Green™ J-Port

¼ Drehung im Uhrzeigersinn
zum Verbinden mit **jejunalem**
Verlängerungsset (Glow Green™)


Größen und Artikelnummern

14 French / 8 French

Füllmenge

Min. 3 ml | Empfohlen 4 ml | Max. 5 ml

| Gastral (cm) | Jejunal (cm) | Art.-Nr. | PZN |
|--------------|--------------|---------------|----------|
| 0,8 | 10 | MGJ-1408-10-I | 17817863 |
| 0,8 | 15 | MGJ-1408-15-I | 17817892 |
| 0,8 | 22 | MGJ-1408-22-I | 17817917 |
| 1,0 | 10 | MGJ-1410-10-I | 17817946 |
| 1,0 | 15 | MGJ-1410-15-I | 17817969 |
| 1,0 | 22 | MGJ-1410-22-I | 17818006 |
| 1,2 | 10 | MGJ-1412-10-I | 17818029 |
| 1,2 | 15 | MGJ-1412-15-I | 17818041 |
| 1,2 | 22 | MGJ-1412-22-I | 17818064 |
| 1,2 | 30 | MGJ-1412-30-I | 17818101 |
| 1,5 | 10 | MGJ-1415-10-I | 17818130 |
| 1,5 | 15 | MGJ-1415-15-I | 17818153 |
| 1,5 | 22 | MGJ-1415-22-I | 17818182 |
| 1,5 | 30 | MGJ-1415-30-I | 17818207 |
| 1,7 | 10 | MGJ-1417-10-I | 17818259 |
| 1,7 | 15 | MGJ-1417-15-I | 17818271 |
| 1,7 | 22 | MGJ-1417-22-I | 17818294 |
| 1,7 | 30 | MGJ-1417-30-I | 17818319 |
| 2,0 | 22 | MGJ-1420-22-I | 17818408 |
| 2,0 | 30 | MGJ-1420-30-I | 17818437 |
| 2,3 | 22 | MGJ-1423-22-I | 17818489 |
| 2,3 | 30 | MGJ-1423-30-I | 17818503 |
| 2,5 | 22 | MGJ-1425-22-I | 17818555 |
| 2,5 | 30 | MGJ-1425-30-I | 17818578 |

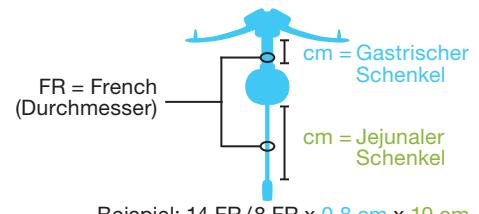

Jedem micro G-JET® liegen folgende Verlängerungen bei:


1 x 8-1255-ISOSAF
(Y-ENFit-Anschluss, rechtwinklig, 30 cm, jejunal)

1 x 6-1222-ISOSAF
(Y-ENFit-Anschluss, rechtwinklig, 30 cm, gastral)

Passendes Zubehör

| Art.-Nr. | Bezeichnung | VE |
|----------|--|--------|
| 4-GW-5 | Führungsdrat, 180 cm | 10 Stk |
| 1804 | Balloon Stoma Längenmesser, kann mit Führungsdrat verwendet werden | 10 Stk |

Die Messung der Stomalänge ist für die richtige Größe und somit optimale Abdichtung sehr wichtig. Wir empfehlen vor jedem Wechsel die Messung der Stomalänge.

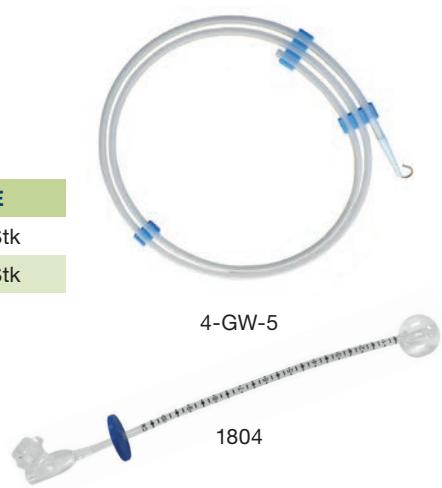

Passende Verlängerungssets

Für den micro G-JET® werden sowohl Anschlüsse für den gastrischen Zugang als auch für den jejunalen Zugang benötigt.

Jejunale Anschlüsse:

| Anschluss | | | Y-ENFit® | Y-Port XL, klar (kein ENFit®) | Y-Port, lila (kein ENFit®) | ENFit® | Bolus (kein ENFit®) | Hybrid (ENFit® + Bolus) |
|-----------------------------|--------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Konnektor Länge | | | | | | | | |
| Für jejunalen Anschluss J | Rechtwinklig | 5 cm (2") | 8-0222-ISOSAF PZN 14345323 | 8-0222 PZN 14344453 | - | - | - | - |
| | | 30 cm (12") | 8-1255-ISOSAF PZN 14345151 | 8-1222 PZN 14344542 | 8-1255 PZN 14344418 | 8-1221-ISOSAF PZN 14345240 | 8-1221 PZN 14344430 | 8-1255-H PZN 14345211 |
| | | 60 cm (24") | 8-2455-ISOSAF PZN 14345168 | 8-2422 PZN 14344476 | 8-2455 PZN 14344424 | 8-2421-ISOSAF PZN 14345257 | 8-2421 PZN 14344447 | 8-2455-H PZN 14345263 |
| | Gerade | 5 cm (2") | 8-0212-ISOSAF PZN 14344878 | 8-0212 PZN 14344513 | - | 8-0211-ISOSAF PZN 14347380 | 8-0211 PZN 14344482 | - |
| Für gastrischen Anschluss G | | 30 cm (12") | 8-1212-ISOSAF PZN 14344861 | 8-1212 PZN 14344536 | - | 8-1211-ISOSAF PZN 14345174 | 8-1211 PZN 14344499 | - |
| | | 60 cm (24") | - | - | - | 8-2411-ISOSAF PZN 14345145 | 8-2411 PZN 14344507 | - |

* Größeres inneres Lumen

Gastrische Anschlüsse:



Verlängerungen, die jedem micro G-JET® Button beigelegt sind

| Anschluss | | | Y-ENFit® | Y-Port XL, klar (kein ENFit®) | | ENFit® | Bolus (kein ENFit®) | |
|-----------------------------|--------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|------------------------|--|
| Konnektor Länge | | | | | | | | |
| Für gastrischen Anschluss G | Rechtwinklig | 5 cm (2") | - | - | | - | - | |
| | | 30 cm (12") | 6-1222-ISOSAF PZN 14345205 | 6-1222 PZN 14344335 | | 6-1221-ISOSAF PZN 14345292 | 6-1221 PZN 14344269 | |
| | | 60 cm (24") | 6-2422-ISOSAF PZN 14344358 | 6-2422 PZN 14344341 | | 6-2421-ISOSAF PZN 14345317 | 6-2421 PZN 14344281 | |
| Für gastrischen Anschluss G | Gerade | 5 cm (2") | 6-0212-ISOSAF PZN 14344370 | 6-0212 PZN 14344364 | | 6-0211-ISOSAF PZN 14346274 | 6-0211 PZN 14344401 | |
| | | 30 cm (12") | 6-1212-ISOSAF PZN 14344393 | 6-1212 PZN 14344387 | | 6-1211-ISOSAF PZN 14345286 | 6-1211 PZN 14344298 | |
| | | 60 cm (24") | - | - | | 6-2411-ISOSAF PZN 14345300 | 6-2411 PZN 14344306 | |

Hinweis: Eine Verkaufeinheit enthält 10 Stück. Die Verlängerungssets sind bis zu 2 Wochen nutzbar.

G-JET® Button

Kombinierte Dünndarm-Magensonde für die Gastrostomie



Klare Markierungen

Verwechslungssicher durch unterschiedliche Anschlussformen von J- und G-Port



Glow Green™ J-Port

Für die Anwendung bei Nacht



Knickschutz (16 + 18 Fr)

MRT-fähige Spiralverstärkung verhindert ein Abknicken und ermöglicht optimalen Durchfluss



Weißer G-Port

¾ Drehung im Uhrzeigersinn zum Verbinden mit **gastrischem Verlängerungsset (weiß)**

Glow Green™ J-Port


¼ Drehung im Uhrzeigersinn zum Verbinden mit **jejunalem Verlängerungsset (Glow Green™)**

Mehr Sicherheit

Die versehentliche Zuführung von Nahrung in den Magen (statt in das Jejunum) kann ein Risiko bedeuten. Die G-JET® Zugänge (gastrisch und jejunal) können durch unterschiedliche Anschlussformen nicht verwechselt werden. **Das Risiko von Fehlverbindungen wird reduziert.** Für jeden Port sind unterschiedliche Ernährungs-/Verlängerungssets erforderlich.

Was macht den G-JET® so besonders?

Beim G-JET® wurden die **Bedürfnisse der Patienten weiter in den Vordergrund gestellt**, sodass trotz Stoma eine hohe Lebensqualität ermöglicht werden soll.

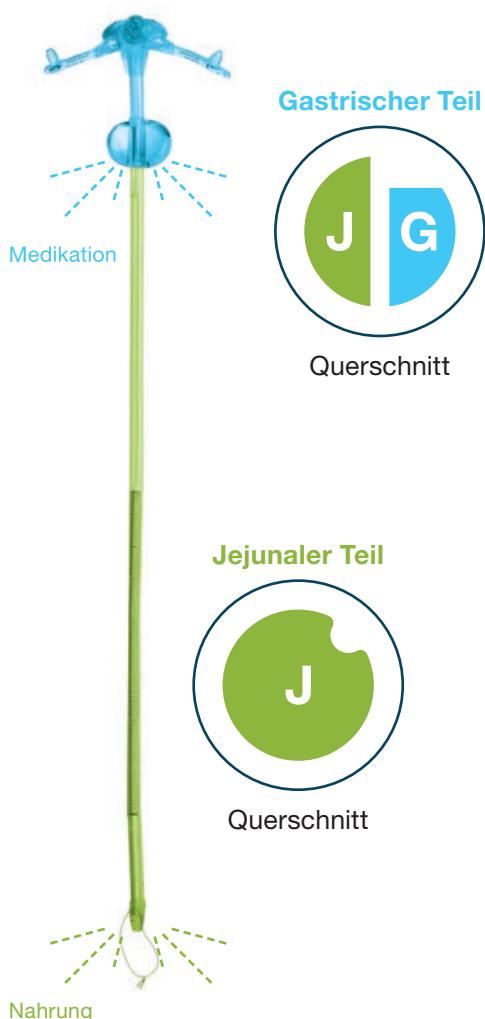

Geringeres Risiko der Sondenverstopfung

Während der G-JET® im gastrischen Teil noch doppelumig ist, wird er im jejunalen Teil einlumig. Dies ermöglicht den bestmöglichen Durchfluss und minimiert das Risiko einer Sondenverstopfung.




Dank des beiliegenden Adapters wird das Einführen des Führungsdrähtes für das Legen des G-Jet® vereinfacht.

Passendes Zubehör

| Art.-Nr. | Bezeichnung | VE |
|----------|---|---------|
| 4-GW-5 | Führungsdräht, 180 cm | 10 Stk. |
| 1804 | Balloon Stoma Längenmesser, kann mit Führungsdräht verwendet werden | 10 Stk. |

Die Messung der Stomalänge ist für die richtige Größe und somit optimale Abdichtung sehr wichtig. Wir empfehlen vor jedem Wechsel die Messung der Stomalänge, mindestens aber beim Wechsel von einem anderen Hersteller auf den G-Jet® bzw. bei Größen- oder Gewichtsänderungen.



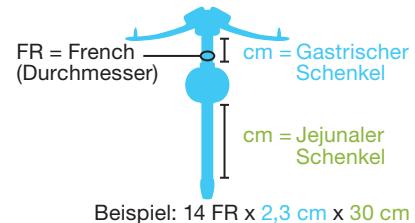

Größen und Artikelnummern

| 14 French | | | | 16 French | | | | 18 French | | | |
|---|--------------|--------------|----------|---|--------------|--------------|----------|---|--------------|--------------|----------|
| Füllmenge Min. 3 ml Empfohlen 4 ml Max. 5 ml | | | | Füllmenge Min. 3 ml Empfohlen 4 ml Max. 5 ml | | | | Füllmenge Min. 7 ml Empfohlen 8 ml Max. 9 ml | | | |
| Gastr. (cm) | Jejunal (cm) | Art.-Nr. | PZN | Gastr. (cm) | Jejunal (cm) | Art.-Nr. | PZN | Länge (cm) | Jejunal (cm) | Art.-Nr. | PZN |
| 1,0 | 15 | GJ-1410-15-I | 14346340 | 1,0 | 15 | GJ-1610-15-I | 14346707 | | | | |
| | 22 | GJ-1410-22-I | 14346357 | | 22 | GJ-1610-22-I | 14346713 | | | | |
| 1,2 | 15 | GJ-1412-15-I | 14346363 | 1,2 | 15 | GJ-1612-15-I | 14346742 | 1,2 | 22 | GJ-1812-22-I | 14347084 |
| | 22 | GJ-1412-22-I | 14346386 | | 22 | GJ-1612-22-I | 14346759 | | 30 | GJ-1812-30-I | 14347090 |
| | 30 | GJ-1412-30-I | 14346400 | | 30 | GJ-1612-30-I | 14346765 | | | | |
| 1,5 | 15 | GJ-1415-15-I | 14346417 | 1,5 | 15 | GJ-1615-15-I | 14346771 | 1,5 | 22 | GJ-1815-22-I | 14347109 |
| | 22 | GJ-1415-22-I | 14346423 | | 22 | GJ-1615-22-I | 14346788 | | 30 | GJ-1815-30-I | 14347121 |
| | 30 | GJ-1415-30-I | 14346452 | | 30 | GJ-1615-30-I | 14346794 | | 45 | GJ-1815-45-I | 14347138 |
| | 45 | GJ-1415-45-I | 14346469 | | 45 | GJ-1615-45-I | 14346802 | | | | |
| 1,7 | 15 | GJ-1417-15-I | 14346475 | 1,7 | 15 | GJ-1617-15-I | 14346819 | 1,7 | 22 | GJ-1817-22-I | 14347144 |
| | 22 | GJ-1417-22-I | 14346481 | | 22 | GJ-1617-22-I | 14346825 | | 30 | GJ-1817-30-I | 14347150 |
| | 30 | GJ-1417-30-I | 14346498 | | 30 | GJ-1617-30-I | 14346831 | | 45 | GJ-1817-45-I | 14347167 |
| | 45 | GJ-1417-45-I | 14346506 | | 45 | GJ-1617-45-I | 14346848 | | | | |
| 2,0 | 22 | GJ-1420-22-I | 14346512 | 2,0 | 22 | GJ-1620-22-I | 14346854 | 2,0 | 22 | GJ-1820-22-I | 14347173 |
| | 30 | GJ-1420-30-I | 14346529 | | 30 | GJ-1620-30-I | 14346860 | | 30 | GJ-1820-30-I | 14347196 |
| | 45 | GJ-1420-45-I | 14346535 | | 45 | GJ-1620-45-I | 14346877 | | 45 | GJ-1820-45-I | 14347204 |
| 2,3 | 30 | GJ-1423-30-I | 14346541 | 2,3 | 30 | GJ-1623-30-I | 14346883 | 2,3 | 30 | GJ-1823-30-I | 14347210 |
| | 45 | GJ-1423-45-I | 14346558 | | 45 | GJ-1623-45-I | 14346908 | | 45 | GJ-1823-45-I | 14347227 |
| 2,5 | 30 | GJ-1425-30-I | 14346564 | 2,5 | 30 | GJ-1625-30-I | 14346914 | 2,5 | 30 | GJ-1825-30-I | 14347233 |
| | 45 | GJ-1425-45-I | 14346570 | | 45 | GJ-1625-45-I | 14346920 | | 45 | GJ-1825-45-I | 14347256 |
| 2,7 | 30 | GJ-1427-30-I | 14346587 | 2,7 | 30 | GJ-1627-30-I | 14346937 | 2,7 | 30 | GJ-1827-30-I | 14347262 |
| | 45 | GJ-1427-45-I | 14346593 | | 45 | GJ-1627-45-I | 14346943 | | 45 | GJ-1827-45-I | 14347279 |
| 3,0 | 45 | GJ-1430-45-I | 14346601 | 3,0 | 45 | GJ-1630-45-I | 14346966 | 3,0 | 45 | GJ-1830-45-I | 14347285 |
| 3,5 | 45 | GJ-1435-45-I | 14346618 | 3,5 | 45 | GJ-1635-45-I | 14346995 | 3,5 | 45 | GJ-1835-45-I | 14347291 |
| 4,0 | 45 | GJ-1440-45-I | 14346624 | 4,0 | 45 | GJ-1640-45-I | 14347003 | 4,0 | 45 | GJ-1840-45-I | 14347316 |
| 4,4 | 45 | GJ-1444-45-I | 14346630 | 4,4 | 45 | GJ-1644-45-I | 14347026 | 4,4 | 45 | GJ-1844-45-I | 14347322 |
| 5,0 | 45 | GJ-1450-45-I | 14346647 | 5,0 | 45 | GJ-1650-45-I | 14347032 | 5,0 | 45 | GJ-1850-45-I | 14347339 |
| 5,5 | 45 | GJ-1455-45-I | 14346653 | 5,5 | 45 | GJ-1655-45-I | 14347049 | 5,5 | 45 | GJ-1855-45-I | 14347345 |
| 6,0 | 45 | GJ-1460-45-I | 14346676 | 6,0 | 45 | GJ-1660-45-I | 14347055 | 6,0 | 45 | GJ-1860-45-I | 14347374 |

Jedem G-JET® liegen folgende Verlängerungen bei:

1 x 8-1255-ISOSAF (Y-ENFit-Anschluss, rechtwinklig, 30 cm, jejunal)

1 x 6-1222-ISOSAF (Y-ENFit-Anschluss, rechtwinklig, 30 cm, gastral)

Passende Verlängerungssets

Für den G-JET® werden sowohl Anschlüsse für den gastrischen Zugang als auch für den jejunalen Zugang benötigt.

Jejunale Anschlüsse:

| Anschluss | | | Y-ENFit® | Y-Port XL, klar (kein ENFit®) | Y-Port, lila (kein ENFit®) | ENFit® | Bolus (kein ENFit®) | Hybrid (ENFit® + Bolus) |
|-----------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Konnektor Länge | | | | | | | | |
| Für jejunalen Anschluss J | Rechtwinklig | 5 cm (2") | 8-0222-ISOSAF PZN 14345323 | 8-0222 PZN 14344453 | - | - | - | - |
| | | 30 cm (12") | 8-1255-ISOSAF PZN 14345151 | 8-1222 PZN 14344542 | 8-1255 PZN 14344418 | 8-1221-ISOSAF PZN 14345240 | 8-1221 PZN 14344430 | 8-1255-H PZN 14345211 |
| | | 60 cm (24") | 8-2455-ISOSAF PZN 14345168 | 8-2422 PZN 14344476 | 8-2455 PZN 14344424 | 8-2421-ISOSAF PZN 14345257 | 8-2421 PZN 14344447 | 8-2455-H PZN 14345263 |
| | Gerade | 5 cm (2") | 8-0212-ISOSAF PZN 14344878 | 8-0212 PZN 14344513 | - | 8-0211-ISOSAF PZN 14347380 | 8-0211 PZN 14344482 | - |
| Für gastrischen Anschluss G | | 30 cm (12") | 8-1212-ISOSAF PZN 14344861 | 8-1212 PZN 14344536 | - | 8-1211-ISOSAF PZN 14345174 | 8-1211 PZN 14344499 | - |
| | | 60 cm (24") | - | - | - | 8-2411-ISOSAF PZN 14345145 | 8-2411 PZN 14344507 | - |

* Größeres inneres Lumen



Verlängerungen die jedem G-JET® Button beigelegt sind

Gastrische Anschlüsse:


| Anschluss | | | Y-ENFit® | Y-Port XL, klar (kein ENFit®) | | ENFit® | Bolus (kein ENFit®) | |
|-----------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|------------------------|--|
| Konnektor Länge | | | | | | | | |
| Für gastrischen Anschluss G | Rechtwinklig | 5 cm (2") | - | - | | - | - | |
| | | 30 cm (12") | 6-1222-ISOSAF PZN 14345205 | 6-1222 PZN 14344335 | | 6-1221-ISOSAF PZN 14345292 | 6-1221 PZN 14344269 | |
| | | 60 cm (24") | 6-2422-ISOSAF PZN 14344358 | 6-2422 PZN 14344341 | | 6-2421-ISOSAF PZN 14345317 | 6-2421 PZN 14344281 | |
| | Gerade | 5 cm (2") | 6-0212-ISOSAF PZN 14344370 | 6-0212 PZN 14344364 | | 6-0211-ISOSAF PZN 14346274 | 6-0211 PZN 14344401 | |
| | | 30 cm (12") | 6-1212-ISOSAF PZN 14344393 | 6-1212 PZN 14344387 | | 6-1211-ISOSAF PZN 14345286 | 6-1211 PZN 14344298 | |
| | | 60 cm (24") | - | - | | 6-2411-ISOSAF PZN 14345300 | 6-2411 PZN 14344306 | |

Hinweis: Eine Verkaufeinheit enthält 10 Stück. Die Verlängerungssets sind bis zu 2 Wochen nutzbar.

Traditioneller G-JET®

Gastrisch-jejunale Ernährungssonde für variable Stomalängen

- Exklusives Produkt
- Geringeres Risiko der Sondenverstopfung
- Verbesserter Komfort
- Verstellbare Halteplatte für Stoma Längen bis zu 10 cm
- Knickschutz

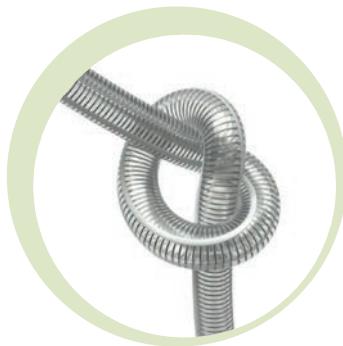


MRT-fähige Spiral-
verstärkung verhindert
ein Abknicken und
ermöglicht optimalen
Durchfluss



Größeres Lumen bei gleicher French Größe

Der traditionelle G-Jet® liefert bei gleichem Außendurchmesser ein größeres Lumen im gastrischen und jenunalen Teil. Dadurch wird der Durchfluss begünstigt und das Risiko einer Sondenverstopfung verringert.

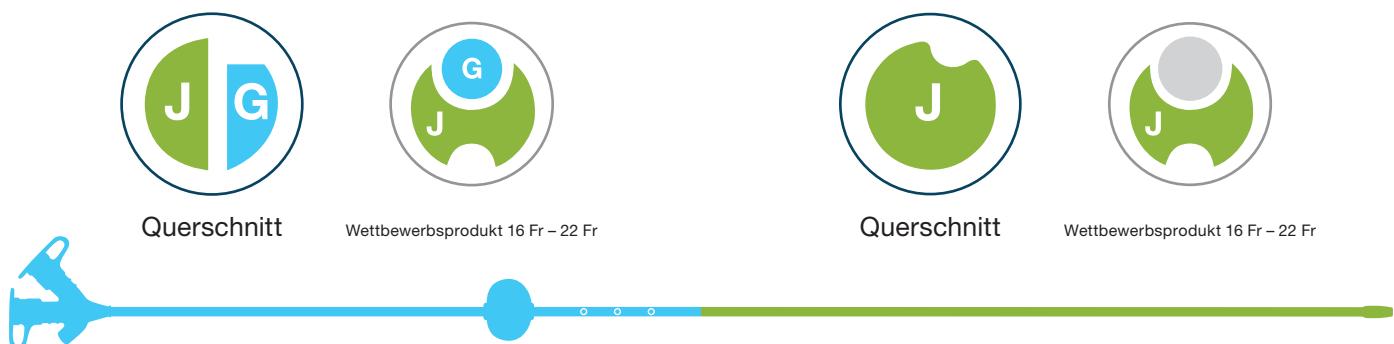

Vergleich Gastrisches Lumen¹

Größe **14 Fr** ist **exklusiv**, wird von keinem Wettbewerber angeboten

Größe **16 Fr** ist **41 % größer** als das Wettbewerbsprodukt **16 Fr**

Größe **18 Fr** ist **34 % größer** als das Wettbewerbsprodukt **18 Fr**

¹ Gemäß interner Tests mit 14 Fr – 22 Fr Produkten

Vergleich Jejunales Lumen¹

Größe **14 Fr** ist → **56 % größer** als das Wettbewerbsprodukt **16 Fr**
→ **22 % größer** als das Wettbewerbsprodukt **18 Fr**

Größe **16 Fr** ist → **131 % größer** als das Wettbewerbsprodukt **16 Fr**
→ **81 % größer** als das Wettbewerbsprodukt **18 Fr**

Größe **18 Fr** ist → **172 % größer** als das Wettbewerbsprodukt **18 Fr**
→ **57 % größer** als das Wettbewerbsprodukt **22 Fr**

Größen und Artikelnummern

| 14 French | | | 16 French | | | 18 French | | |
|---|-------------|----------|---|-------------|----------|---|-------------|----------|
| Füllmenge Min. 3 ml Empfohlen 4 ml Max. 5 ml | | | Füllmenge Min. 3 ml Empfohlen 4 ml Max. 5 ml | | | Füllmenge Min. 7 ml Empfohlen 8 ml Max. 9 ml | | |
| Jejunal (cm) | Art.-Nr. | PZN | Jejunal (cm) | Art.-Nr. | PZN | Jejunal (cm) | Art.-Nr. | PZN |
| 15 | TGJ-14-15-I | 16803161 | 15 | TGJ-16-15-I | 16803267 | | | |
| 22 | TGJ-14-22-I | 16803184 | 22 | TGJ-16-22-I | 16803296 | 22 | TGJ-18-22-I | 16803362 |
| 30 | TGJ-14-30-I | 16803215 | 30 | TGJ-16-30-I | 16803310 | 30 | TGJ-18-30-I | 16803385 |
| 45 | TGJ-14-45-I | 16803238 | 45 | TGJ-16-45-I | 16803333 | 45 | TGJ-18-45-I | 16803416 |

MiniONE® Balloon Button

Ernährungssonde für die Gastrostomie

Der MiniONE® Balloon Button ist so konzipiert, dass er das Stoma optimal abdichtet. Als einziger Button hat er einen apfelförmigen Ballon, der sich horizontal ausdehnt.

Durch seinen konischen Schaft, der am Ballon zusammenläuft, hat der MiniONE® Balloon Button einen festen Sitz und minimiert Undichtigkeiten.

Das langlebige Anti-Rückfluss-Ventil bietet maximalen Schutz.

Durch die verstellbare Füllmenge kann der Ballon individuell angepasst werden, um so eine optimale Abdichtung zu ermöglichen.



**Neues Füllventil für
die 12 Fr Größen:**

Kompatibel mit Luer Slip und Luer Lock Spritzen, das Ventil ist außerdem komplett vom weichem Silikon umschlossen.

Erhöhter Komfort



Geringes Profil
und besonders weich



Maximale Abdichtung
durch besondere Form



Klare Markierungen




Glow Green™ für die
Anwendung bei Nacht

Vorteile des MiniONE® Balloon Buttons


- 37 % flacheres äußeres Profil*
Button sitzt dezent unter der Kleidung
- 30 % kleineres inneres Profil*
Ballon nimmt weniger Platz im Magen ein
- Silikon von höchster medizinischer Qualität
Besonders hautfreundlich und einfach zu reinigen
- Glow Green™
Anschlüsse leuchten im Dunkeln

* im Vergleich zum Konkurrenzprodukt

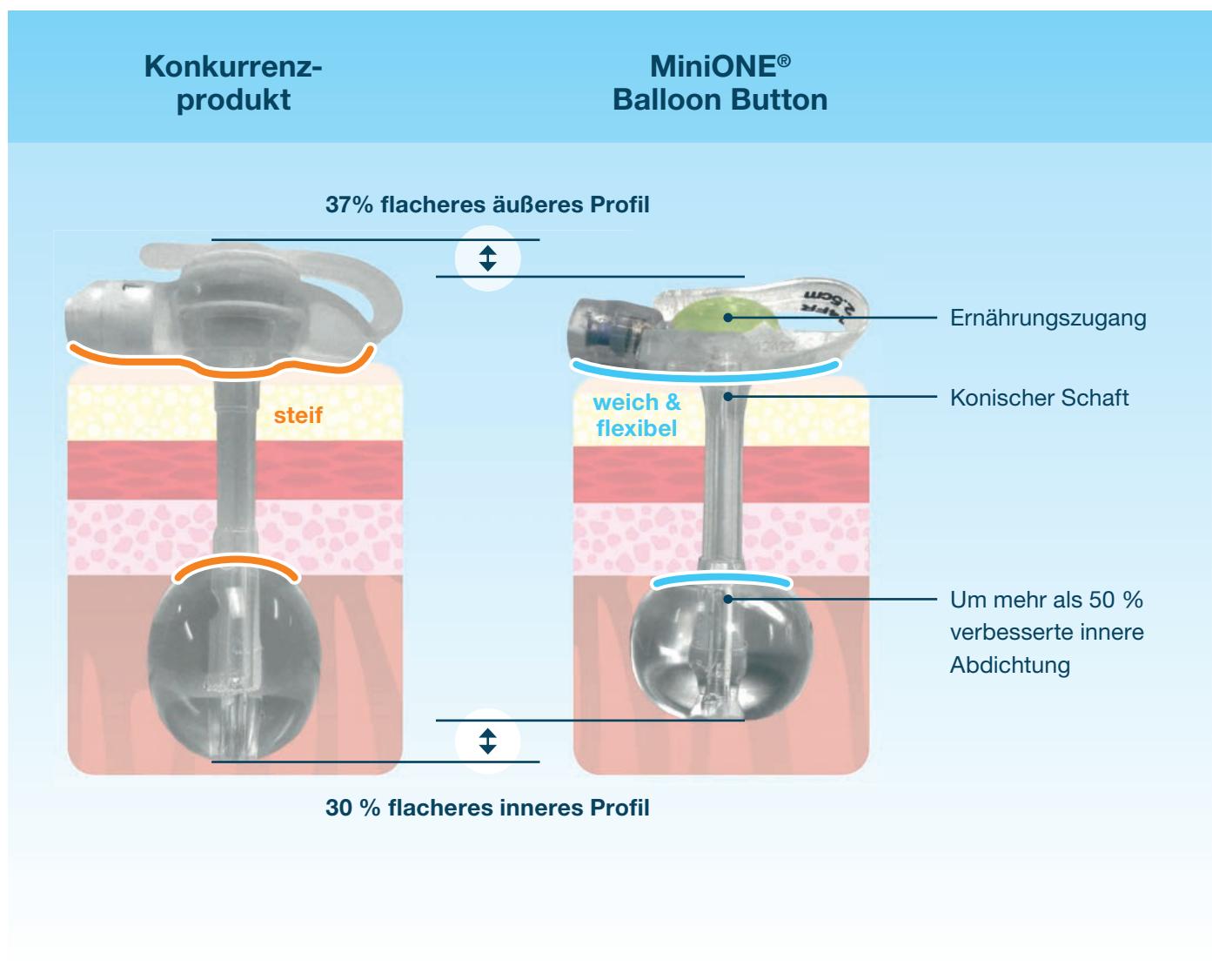

Was macht den MiniONE® Balloon Button so besonders?

Beim MiniONE® Balloon Button wurden die Bedürfnisse der Patienten bestmöglich berücksichtigt, so dass trotz Stoma die Lebensqualität geringstmöglich beeinflusst wird.

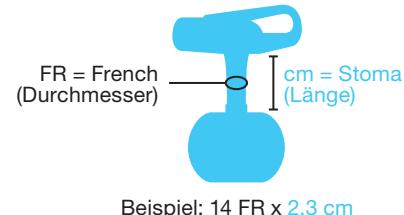

Größen und Artikelnummern

Beispiel: 14 FR x 2,3 cm

| 12 French | | | 14 French | | | 16 French | | |
|---|-------------|----------|---|--------------|----------|---|-------------|----------|
| Füllmenge Min. 2 ml Empfohlen 2,5 ml Max. 3 ml | | | Füllmenge Min. 3 ml Empfohlen 4 ml Max. 5 ml | | | Füllmenge Min. 4 ml Empfohlen 6 ml Max. 8 ml | | |
| Länge (cm) | Art.-Nr. | PZN | Länge (cm) | Art.-Nr. | PZN | Länge (cm) | Art.-Nr. | PZN |
| 0,8 | M1-5-1208-I | 14345352 | 0,8 | M1-5-1408-I | 14345493 | | | |
| 1,0 | M1-5-1210-I | 14345369 | 1,0 | M1-5-1410-I | 14345501 | 1,0 | M1-5-1610-I | 14345694 |
| 1,2 | M1-5-1212-I | 14345375 | 1,2 | M1-5-1412-I | 14345518 | 1,2 | M1-5-1612-I | 14345702 |
| 1,5 | M1-5-1215-I | 14345381 | 1,5 | M1-5-1415-I | 14345530 | 1,5 | M1-5-1615-I | 14345719 |
| 1,7 | M1-5-1217-I | 14345398 | 1,7 | M1-5-1417-I | 14345547 | 1,7 | M1-5-1617-I | 14345725 |
| 2,0 | M1-5-1220-I | 14345406 | 2,0 | M1-5-1420-I | 14345553 | 2,0 | M1-5-1620-I | 14345731 |
| 2,3 | M1-5-1223-I | 14345412 | 2,3 | M1-5-1423-I | 14345576 | 2,3 | M1-5-1623-I | 14345748 |
| 2,5 | M1-5-1225-I | 14345429 | 2,5 | M1-5-1425-I | 14345582 | 2,5 | M1-5-1625-I | 14345754 |
| 2,7 | M1-5-1227-I | 14345435 | 2,7 | M1-5-1427-I | 14345599 | 2,7 | M1-5-1627-I | 14345783 |
| 3,0 | M1-5-1230-I | 14345441 | 3,0 | M1-5-1430-I | 14345607 | 3,0 | M1-5-1630-I | 14345808 |
| 3,5 | M1-5-1235-I | 14345458 | 3,5 | M1-5-1435-I | 14345613 | 3,5 | M1-5-1635-I | 14345820 |
| 4,0 | M1-5-1240-I | 14345464 | 4,0 | M1-5-1440-I | 14345636 | 4,0 | M1-5-1640-I | 14345837 |
| | | | 4,4 | M1-5-1444-I | 14345642 | 4,4 | M1-5-1644-I | 14345843 |
| | | | 5,0 | M1-5-1450-I | 14345659 | | | |
| | | | 5,5 | M1-5-1455-I | 14345665 | | | |
| | | | 6,0 | M1-5-1460-I | 14345671 | | | |
| | | | 6,5 | M1-5-1465-I | 14345688 | | | |
| | | | 7,0 | M1-5-1470-I | 16240048 | | | |
| | | | 8,0 | M1-5-1480-I | 16240060 | | | |
| | | | 9,0 | M1-5-1490-I | 16240083 | | | |
| | | | 10,0 | M1-5-14100-I | 16240114 | | | |

| 18 French | | | 20 French | | | 24 French | | |
|--|-------------|----------|---|-------------|----------|---|-------------|----------|
| Füllmenge Min. 6 ml Empfohlen 8 ml Max. 10 ml | | | Füllmenge Min. 7 ml Empfohlen 10 ml Max. 15 ml | | | Füllmenge Min. 7 ml Empfohlen 10 ml Max. 15 ml | | |
| Länge (cm) | Art.-Nr. | PZN | Länge (cm) | Art.-Nr. | PZN | Länge (cm) | Art.-Nr. | PZN |
| 1,0 | M1-5-1810-I | 14345866 | 1,0 | M1-5-2010-I | 14346015 | | | |
| 1,2 | M1-5-1812-I | 14345872 | 1,2 | M1-5-2012-I | 14346021 | | | |
| 1,5 | M1-5-1815-I | 14345889 | 1,5 | M1-5-2015-I | 14346038 | 1,5 | M1-5-2415-I | 14346162 |
| 1,7 | M1-5-1217-I | 14345895 | 1,7 | M1-5-2017-I | 14346044 | 1,7 | M1-5-2417-I | 14346179 |
| 2,0 | M1-5-1820-I | 14345903 | 2,0 | M1-5-2020-I | 14346050 | 2,0 | M1-5-2420-I | 14346185 |
| 2,3 | M1-5-1823-I | 14345926 | 2,3 | M1-5-2023-I | 14346067 | 2,3 | M1-5-2423-I | 14346191 |
| 2,5 | M1-5-1825-I | 14345932 | 2,5 | M1-5-2025-I | 14346073 | 2,5 | M1-5-2425-I | 14346216 |
| 2,7 | M1-5-1827-I | 14345949 | 2,7 | M1-5-2027-I | 14346096 | 2,7 | M1-5-2427-I | 14346222 |
| 3,0 | M1-5-1830-I | 14345955 | 3,0 | M1-5-2030-I | 14346104 | 3,0 | M1-5-2430-I | 14346239 |
| 3,5 | M1-5-1835-I | 14345961 | 3,5 | M1-5-2035-I | 14346110 | 3,5 | M1-5-2435-I | 14346245 |
| 4,0 | M1-5-1840-I | 14345978 | 4,0 | M1-5-2040-I | 14346127 | 4,0 | M1-5-2440-I | 14346251 |
| 4,4 | M1-5-1844-I | 14345984 | 4,4 | M1-5-2044-I | 14346133 | 4,4 | M1-5-2444-I | 14346268 |
| 5,0 | M1-5-1850-I | 14345990 | | | | | | |
| 6,0 | M1-5-1860-I | 14346009 | | | | | | |

Jedem Artikel liegen folgende Verlängerungen bei:

1 x 8-1255-ISOSAF (Y-ENFit®-Anschluss, rechtwinklig, 30 cm), 1 x 8-1211-ISOSAF (ENFit®-Anschluss, gerade, 30 cm)

Passende Verlängerungssets

Die folgenden Verlängerungssets passen für alle Größen des MiniONE® Balloon Buttons und sind für die Ernährung und zur Entlüftung geeignet.

| | | Anschluss | Y-ENFit® | Y-Port XL, klar (kein ENFit®) | Y-Port, lila (kein ENFit®) | ENFit® | Bolus (kein ENFit®) | Hybrid (ENFit® + Bolus) |
|--|-------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Konnektor | Länge | | | | | | | |
|  Rechtwinklig | 5 cm (2") | 8-0222-ISOSAF PZN 14345323 | 8-0222 PZN 14344453 | - | - | - | - | - |
| | 30 cm (12") | 8-1255-ISOSAF PZN 14345151 | 8-1222 PZN 14344542 | 8-1255 PZN 14344418 | 8-1221-ISOSAF PZN 14345240 | 8-1221 PZN 14344430 | 8-1255-H PZN 14345211 | |
| | 60 cm (24") | 8-2455-ISOSAF PZN 14345168 | 8-2422 PZN 14344476 | 8-2455 PZN 14344424 | 8-2421-ISOSAF PZN 14345257 | 8-2421 PZN 14344447 | 8-2455-H PZN 14345263 | |
|  Gerade | 5 cm (2") | 8-0212-ISOSAF PZN 14344878 | 8-0212 PZN 14344513 | - | 8-0211-ISOSAF PZN 14347380 | 8-0211 PZN 14344482 | - | |
| | 30 cm (12") | 8-1212-ISOSAF PZN 14344861 | 8-1212 PZN 14344536 | - | 8-1211-ISOSAF PZN 14345174 | 8-1211 PZN 14344499 | - | |
| | 60 cm (24") | - | - | - | 8-2411-ISOSAF PZN 14345145 | 8-2411 PZN 14344507 | - | |

* Größeres inneres Lumen


Hinweis: Eine Verkaufeinheit enthält 10 Stück.
Die Verlängerungssets sind bis zu 2 Wochen nutzbar.

 Verlängerungen die jedem MiniONE® Balloon Button beigelegt sind

Balloon Stomalängenmesser

Zur optimalen Bestimmung der Stomalänge

Die Messung der Stomalänge ist für die richtige Größe und somit optimale Abdichtung sehr wichtig. Wir empfehlen vor jedem Wechsel die Messung der Stomalänge, mindestens aber beim Wechsel von einem anderen Hersteller auf den MiniONE® Balloon Button bzw. bei Größen- oder Gewichtsänderungen.

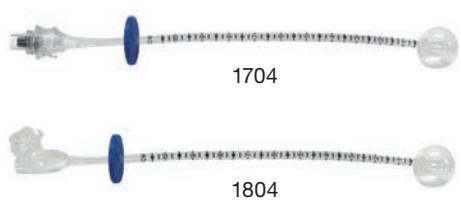

| Art.-Nr. | Bezeichnung | VE |
|----------|---|---------|
| 1704 | Balloon Stoma Längenmesser, Standard | 10 Stk. |
| 1804 | Balloon Stoma Längenmesser, kann mit Führungsdrähten verwendet werden | 10 Stk. |

MiniONE® Capsule Non-Balloon Button

Optimale Alternative zu einem Balloon Button



Innovative Technologie

- Wechsel sind seltener notwendig.
- Das Kapsel-Material ist selbstschmierend und erleichtert somit das Einführen.
- Noch flacheres Design.


Optional ist auch der MiniONE® Non-Balloon Button erhältlich (ohne Kapseltechnologie). **Sprechen Sie uns gerne an!**



Kapsel geschlossen



Durch Ziehen am Faden wird die Kapsel geöffnet

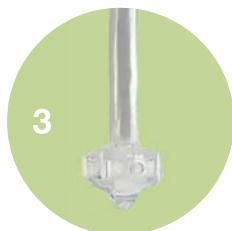

Die Kapsel fällt ab und löst sich im Magen auf


Erhöhter Komfort

- Hochwertiges medizinisches Silikon, welches einfach zu reinigen und angenehm auf der Haut ist.
- Das Kapsel-Design fördert eine möglichst schmerzfreie Platzierung.
- Das innere Rückhalte-Bolster ist kleiner als ein herkömmlicher Ballon und senkt somit die Wahrscheinlichkeit, dass z.B. der Pylorus blockiert wird.



Größen und Artikelnummern

| Größe in French | Stoma Länge in cm | Artikelnummer |
|-----------------|-------------------|---------------|
| 14 | 1,0 | M1-2-1410-I |
| | 1,2 | M1-2-1412-I |
| | 1,5 | M1-2-1415-I |
| | 1,7 | M1-2-1417-I |
| | 2,0 | M1-2-1420-I |
| | 2,5 | M1-2-1425-I |
| | 3,0 | M1-2-1430-I |
| | 3,4 | M1-2-1434-I |
| | 4,4 | M1-2-1444-I |
| | 5,0 | M1-2-1450-I |
| 18 | 1,2 | M1-2-1812-I |
| | 1,5 | M1-2-1815-I |
| | 1,7 | M1-2-1817-I |
| | 2,0 | M1-2-1820-I |
| | 2,4 | M1-2-1824-I |
| | 3,0 | M1-2-1830-I |
| 20 | 3,4 | M1-2-1834-I |
| | 4,4 | M1-2-1844-I |
| | 5,0 | M1-2-1850-I |
| | 6,0 | M1-2-1860-I |
| 24 | 1,7 | M1-2-2417-I |
| | 2,4 | M1-2-2424-I |
| | 3,4 | M1-2-2434-I |
| | 4,4 | M1-2-2444-I |

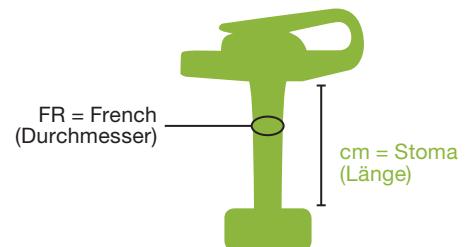

Beispiel: 14 FR x 2,5 cm

Jedem Set beiliegend sind:



8-1211-ISOSAF

8-1255-ISOSAF

Es können die gleichen Verlängerungssets wie beim MiniONE® Balloon Button verwendet werden (Art.Nr. 8-XXXX-ISOSAF), siehe Seite 15.




Entfernungs-Tool

In jedem Set beiliegend

- Zur einfachen und schmerzfreien Entfernung
- Der Schaft des Buttons wird gedehnt, wodurch sich der Durchmesser des Bolsters stark verkleinert.



– normal –

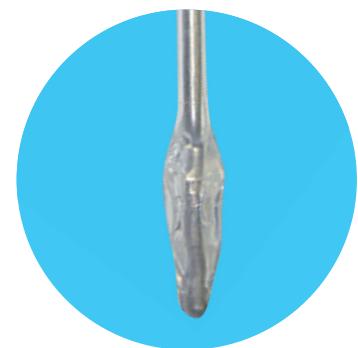

– gestreckt durch Tool –

Klassische Gastro-Tubes

Austauschsonden in verschiedenen Varianten



Klassische Gastro-Tubes bieten einen effizienten und sicheren Weg, Patienten mit Nahrung und Medikamenten zu versorgen.

Um die individuellen Ansprüche der Patienten zu erfüllen, bieten wir neben den innovativen Buttons, Gastro Tubes in verschiedenen Ausführungen an.


Capsule Monarch®
G-Tube

Capsule Dome
G-Tube

Balloon
G-Tube

Vorteile des Ballon G-Tubes

- Der Ballon kann **individuell gefüllt** werden, um eine **optimale Anpassung** zu ermöglichen
- Das **hochwertige Silikon** ist besonders **hautfreundlich** und lässt sich **leicht reinigen**
- Röntgendift, zur Kontrolle der Lage

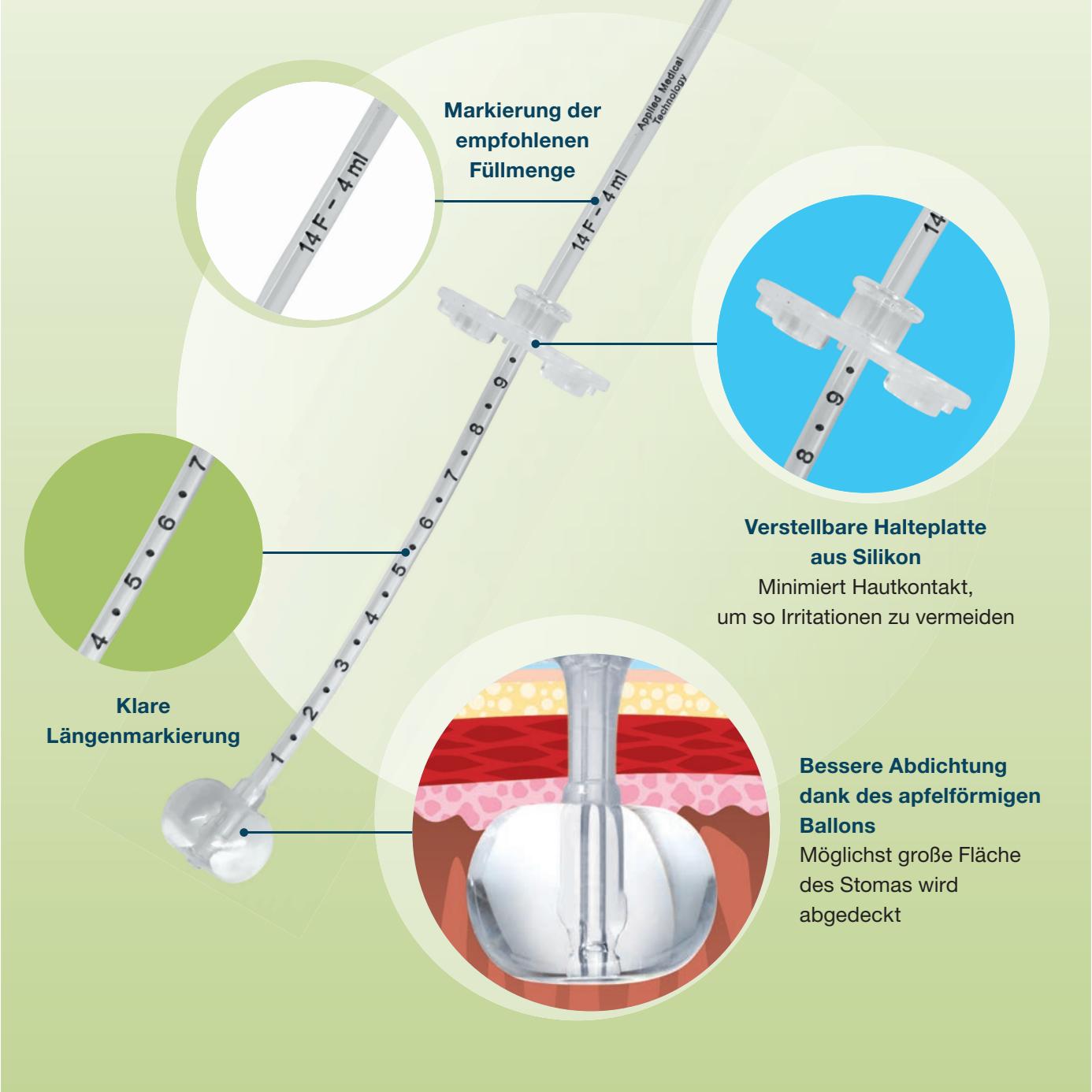

Die drei verschiedenen G-Tubes

Ballon G-Tube | Capsule Dome | Capsule Monarch® G-Tube


Ballon G-Tube

- Der Ballon füllt sich so auf, dass am Ende der Sonde keine Spitze hervortritt und so die Wahrscheinlichkeit einer Magenerosion verringert wird.
- Das flexible Silikon ist schonend, erhöht den Komfort und minimiert Hautirritationen.
- Der Ballon kann **individuell gefüllt** werden, um eine **optimale Anpassung** zu ermöglichen.



Capsule Dome und Capsule Monarch® G-Tube

- Länger haltbar als ein Ballon
- Einzigartige Kapsel-Technologie für eine einfache Platzierung
- Die Ansatzstücke können ausgetauscht und einzeln bestellt werden.

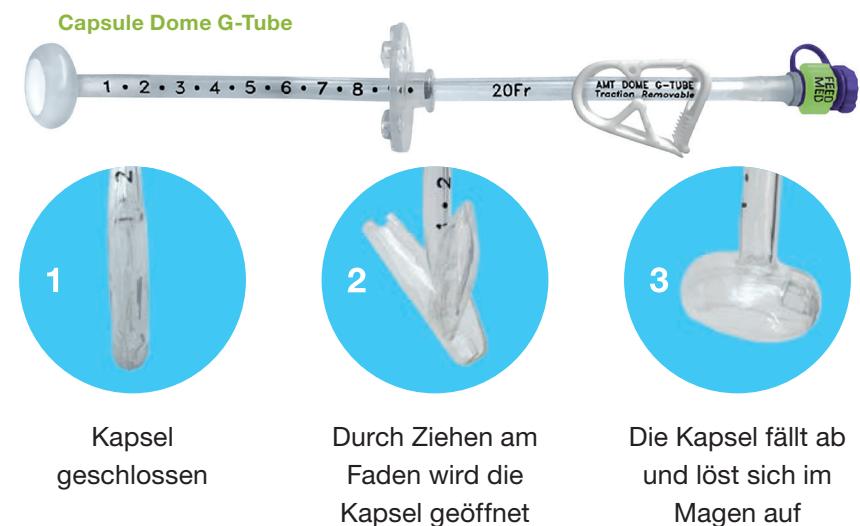

Größen und Artikelnummern



Ballon G-Tube

| 12 French | | 14 French | | 16 French | |
|--|--------------|--|--------------|--|--------------|
| Füllmenge | | Füllmenge | | Füllmenge | |
| Min. 2 ml Empfohlen 2,5 ml Max. 3 ml | | Min. 3 ml Empfohlen 4 ml Max. 5 ml | | Min. 4 ml Empfohlen 6 ml Max. 8 ml | |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Art.-Nr. | Beschreibung | Art.-Nr. | Beschreibung |
| 7-1210-I | ENFit® | 7-1410-I | ENFit® | 7-1610-I | ENFit® |
| 18 French | | 20 French | | 24 French | |
| Füllmenge | | Füllmenge | | Füllmenge | |
| Min. 6 ml Empfohlen 8 ml Max. 10 ml | | Min. 7 ml Empfohlen 10 ml Max. 15 ml | | Min. 7 ml Empfohlen 10 ml Max. 15 ml | |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Art.-Nr. | Beschreibung | Art.-Nr. | Beschreibung |
| 7-1810-I | ENFit® | 7-2010-I | ENFit® | 7-2410-I | ENFit® |



Capsule Dome G-Tube

| 20 French | | 24 French | |
|------------|----------------------------|------------|----------------------------|
| Art.-Nr. | Beschreibung | Art.-Nr. | Beschreibung |
| 9-CG2020-I | ENFit® inkl. Führungsdraht | 9-CG2420-I | ENFit® inkl. Führungsdraht |
| 9-C2020-I | ENFit® ohne Führungsdraht | 9-C2420-I | ENFit® ohne Führungsdraht |



Capsule Monarch® G-Tube


| 12 French | | 14 French | |
|------------|----------------------------|------------|----------------------------|
| Art.-Nr. | Beschreibung | Art.-Nr. | Beschreibung |
| 9-CG1210-I | ENFit® inkl. Führungsdraht | 9-CG1410-I | ENFit® inkl. Führungsdraht |
| 9-C1210-I | ENFit® ohne Führungsdraht | 9-C1410-I | ENFit® ohne Führungsdraht |
| 18 French | | 20 French | |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Art.-Nr. | Beschreibung |
| 9-CG1810-I | ENFit® inkl. Führungsdraht | 9-CG2010-I | ENFit® inkl. Führungsdraht |
| 9-C1810-I | ENFit® ohne Führungsdraht | 9-C2010-I | ENFit® ohne Führungsdraht |

Alle Capsule Dome G-Tubes und Capsule Monarch® G-Tubes sind Führungsdraht kompatibel.

Set für die Erstanlage von PEG-Sonden

Stoma Längenmesser

kann mit Führungsdrähten verwendet werden und unterstützt bei der Festlegung der richtigen Stomalänge um die passende Größe der Sonde zu bestimmen

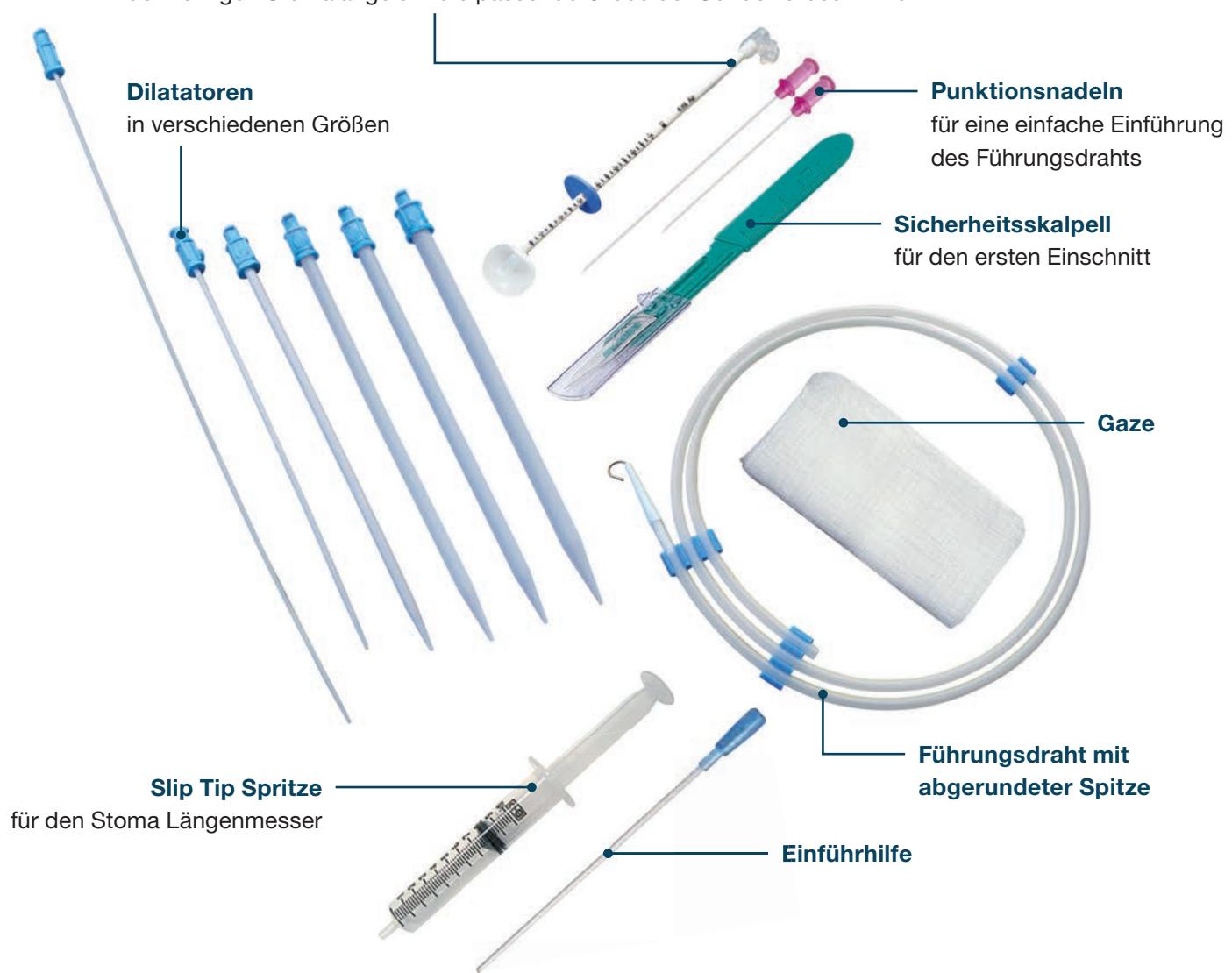

Das Set für die Erstanlage liefert alle erforderlichen Instrumente für die Erstplatzierung von PEG-Sonden. Das Kit ist steril und sofort anwendbar, es beinhaltet alle notwendigen Hilfsmittel um die Platzierung zu vereinfachen. Die große Auswahl an Dilatatoren, der Stoma Längenmesser und andere Bestandteile machen das Set zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel.

! Bitte beachten: Das erforderliche Nahtmaterial zur Befestigung des Magens an der Bauchdecke ist im Set nicht enthalten.

Unsere Erstplatzierungssets reduzieren Traumata, die mit der Entwicklung vom Stoma-Trakt assoziiert werden.

- Kompatibel für laparoskopische Chirurgie
- Kompatibel mit operativer Endoskopie
- Anwendbar mit fluoroskopischer Führung
- Erfordert nur eine endoskopische Öffnung
- Anwendbar für die Größen 12 – 18 French

Doppelte Beutelverpackung

Die zweite Schicht gibt weiteren Schutz, so kann das Set direkt auf dem Operationsfeld geöffnet werden.






Artikelnummern

| Artikelnummer | Beschreibung | |
|---------------|--|--|
| IP-10-S | Set für die Erstanlage 1 Führungsdraht 70 cm (ca. 0,5 mm Durchmesser) 2 Punktionsnadeln, 18 Gauge (kurz, lang) 1 Sicherheitsskapell, #11 3 Dilatatoren (7, 12, 14* French) | 1 Einführhilfe 1 Spritze, 5 ml 1 Stoma Längenmesser 4 Gaze (10 x 10 cm) |
| IP-1218 | Set für die Erstanlage 1 Führungsdraht 90 cm (ca. 1 mm Durchmesser) 2 Punktionsnadeln, 18 Gauge (kurz, lang) 1 Sicherheitsskapell, #11 6 Dilatatoren (5, 7, 12, 16, 18, 22 French) | 1 Einführhilfe 1 Spritze, 5 ml 1 Stoma Längenmesser 4 Gaze (10 x 10 cm) |
| IP-1218-S | Set für die Erstanlage 1 Führungsdraht 90 cm (ca. 1 mm Durchmesser) 2 Punktionsnadeln, 18 Gauge (kurz, lang) 1 Sicherheitsskapell, #11 6 Dilatatoren (5, 7, 12, 16, 18*, 22 French) | 1 Einführhilfe 1 Spritze, 5 ml 1 Stoma Längenmesser 4 Gaze (10 x 10 cm) |
| IP-DIL-10 | Dilatator Kit 1 Führungsdraht 45 cm (ca. 0,5 mm Durchmesser) 3 Dilatatoren (7, 12, 14 French) | 1 Einführhilfe 2 Punktionsnadeln, 18 Gauge (kurz, lang) |
| IP-DIL | Dilatator Kit 1 Führungsdraht 45 cm (ca. 1 mm Durchmesser) 4 Dilatatoren (7, 12, 16 und 20 French) | 1 Einführhilfe 2 Punktionsnadeln, 18 Gauge (kurz, lang) |
| 1704 | Balloon Stoma Längenmesser, Standard | |
| 1804 | Balloon Stoma Längenmesser, kann mit Führungsdraht verwendet werden | |
| 4-6010 | Einführhilfe, 10 Fr und größer, mit Führungsdraht kompatibel | |
| 4-6000 | Einführhilfe, 12 Fr und größer, mit Führungsdraht kompatibel | |
| 4-5000 | Einführhilfe, 12 Fr und größer, nicht mit Führungsdraht kompatibel | |

Universelle Kanülenfixierung

Neuer Standard in der Pflege

Dank der Kanülenfixierung CINCH® werden Patienten durch Kanülen und Schläuche nicht mehr übermäßig eingeschränkt. Der CINCH® kombiniert einen weichen und flexiblen Silikonkern mit einem atmungsaktiven Grundmaterial, um den Patienten bestmöglichen Komfort sowie Mobilität zu gewähren, während medizinische Schläuche sicher an ihrem Platz gehalten werden.

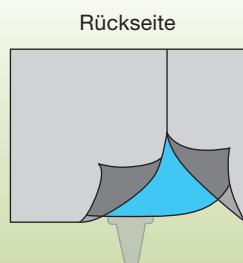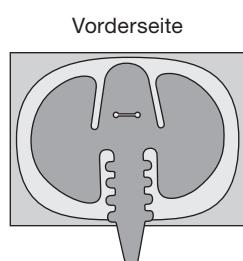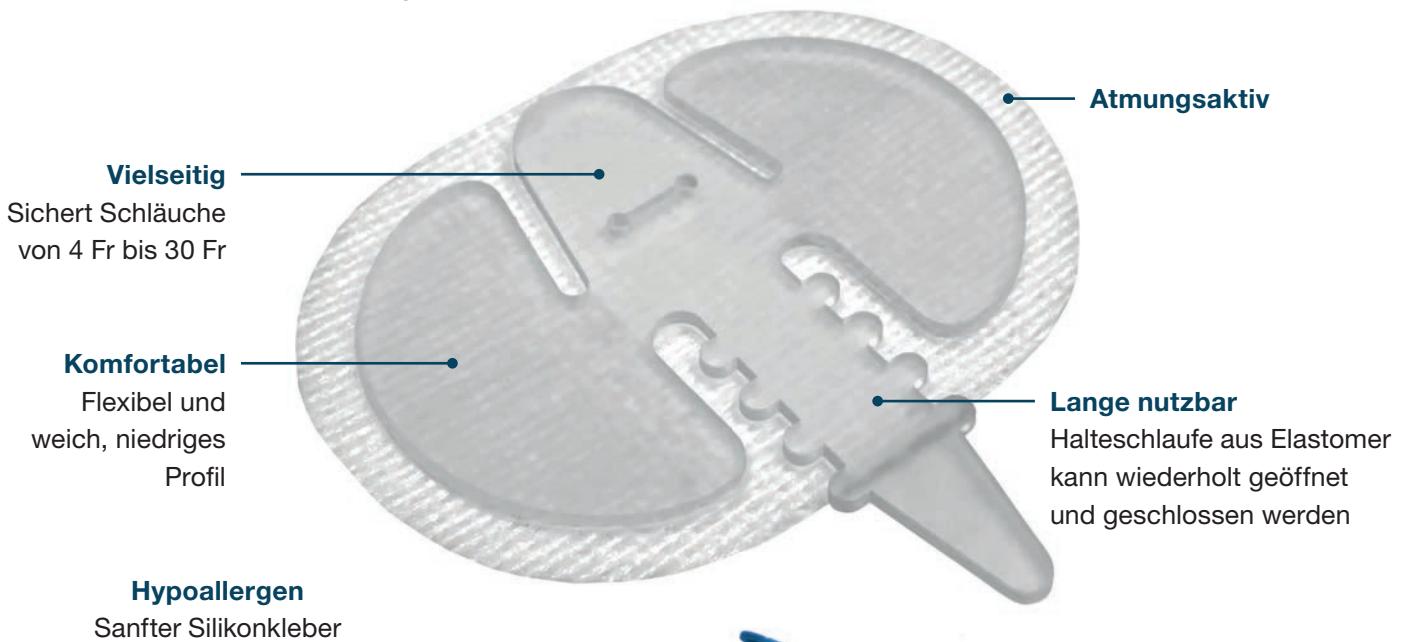




Medium CINCH®

4 Fr bis 17 Fr

Bei der Entwicklung des CINCH® wurde großer Wert auf die Hautfreundlichkeit des Produktes gelegt.

Der hypoallergene Silikonklebstoff bietet eine schonende und zugleich sichere Fixierung des CINCH®. Das niedrige Profil und das flexible Material erhöhen den Tragekomfort und führen dazu, dass das Produkt als nicht-störend wahrgenommen wird, selbst wenn es nicht in Gebrauch ist.

Der CINCH® ermöglicht eine sichere Fixierung medizinischer Schläuche durch Zugentlastung und unterstützt somit die Gesundheit, Sicherheit und den Komfort der Patienten.

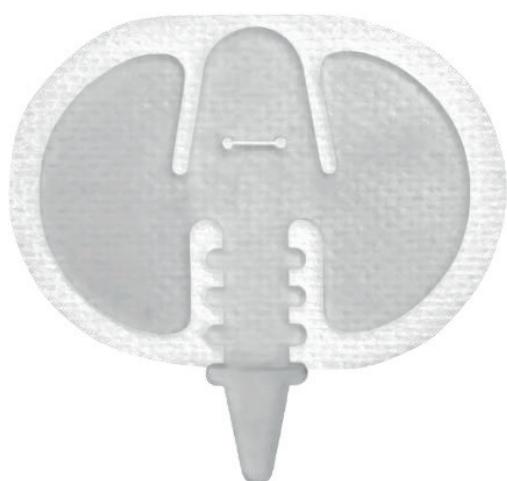

Large CINCH®

9 Fr bis 30 Fr

Medium CINCH® 4 Fr



17 Fr




Large CINCH® 9 Fr




30 Fr




Anwendungshinweise

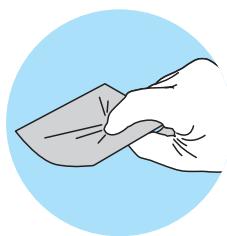


1. Säubern

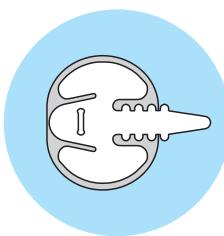

2. Kleben

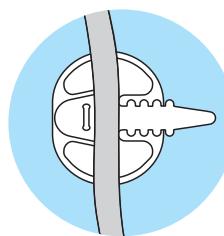

3. Platzieren

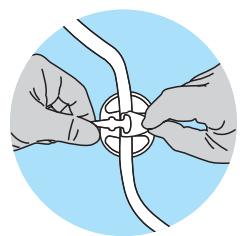

4. Sichern

Artikelnummern

| Produkt | Anwendungsbereich | Größe | Art.-Nr. | VE |
|---------------|-------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|
| CINCH® Medium | 4 Fr bis 17 Fr | 3 cm x 4 cm | CINCH417M-10 CINCH417M-50 | Box à 10 Stk. Box à 50 Stk. |
| CINCH® Large | 9 Fr bis 30 Fr | 4 cm x 6 cm | CINCH930L-10 CINCH930L-50 | Box à 10 Stk. Box à 50 Stk. |

Der CINCH® hält 3 – 5 Tage. Bei Bedarf kann er z.B. vor dem Baden entfernt und danach wieder aufgeklebt werden.

Zubehör

AMT Clamp™

Mit der AMT Clamp™ minimieren Sie das Risiko, dass sich die Verbindung zwischen einem gestuften Adapter („Tannenbaum“) und dem Verlängerungsset löst. Die Klemme stellt sicher, dass der Patient die notwendigen Nährstoffe erhält und vermeidet gleichzeitig das Auslaufen und den Verlust von zugeführten Flüssigkeiten und Medikamenten sowie Nahrung.

| Produkt | Art.-Nr. | Menge |
|------------|----------|---------------|
| AMT Clamp™ | 4-3000 | Box à 10 Stk. |




AMT Adapter

Mit unserer großen Auswahl an ENFit® Adaptersn bieten wir Ihnen die Möglichkeit, eine saubere und sichere Verbindung für unterschiedlichste Anschlüsse herzustellen.

| Produkt | Art.-Nr. | Menge |
|--|----------|---------------|
|  Männlicher ENFit® Adapter | TRN101 | Box à 10 Stk. |
|  Weiblicher ENFit® Adapter | TRN201 | Box à 10 Stk. |
|  Gestufter ENFit® Adapter | TRN102 | Box à 10 Stk. |
|  Bolus ENFit® Adapter | TRN202 | Box à 10 Stk. |
|  Y-Port ENFit® Adapter | TRN203 | Box à 10 Stk. |
|  Y-Port ENFit® Adapter mit verstärktem med. Port | TRN204 | Box à 10 Stk. |

Übersicht

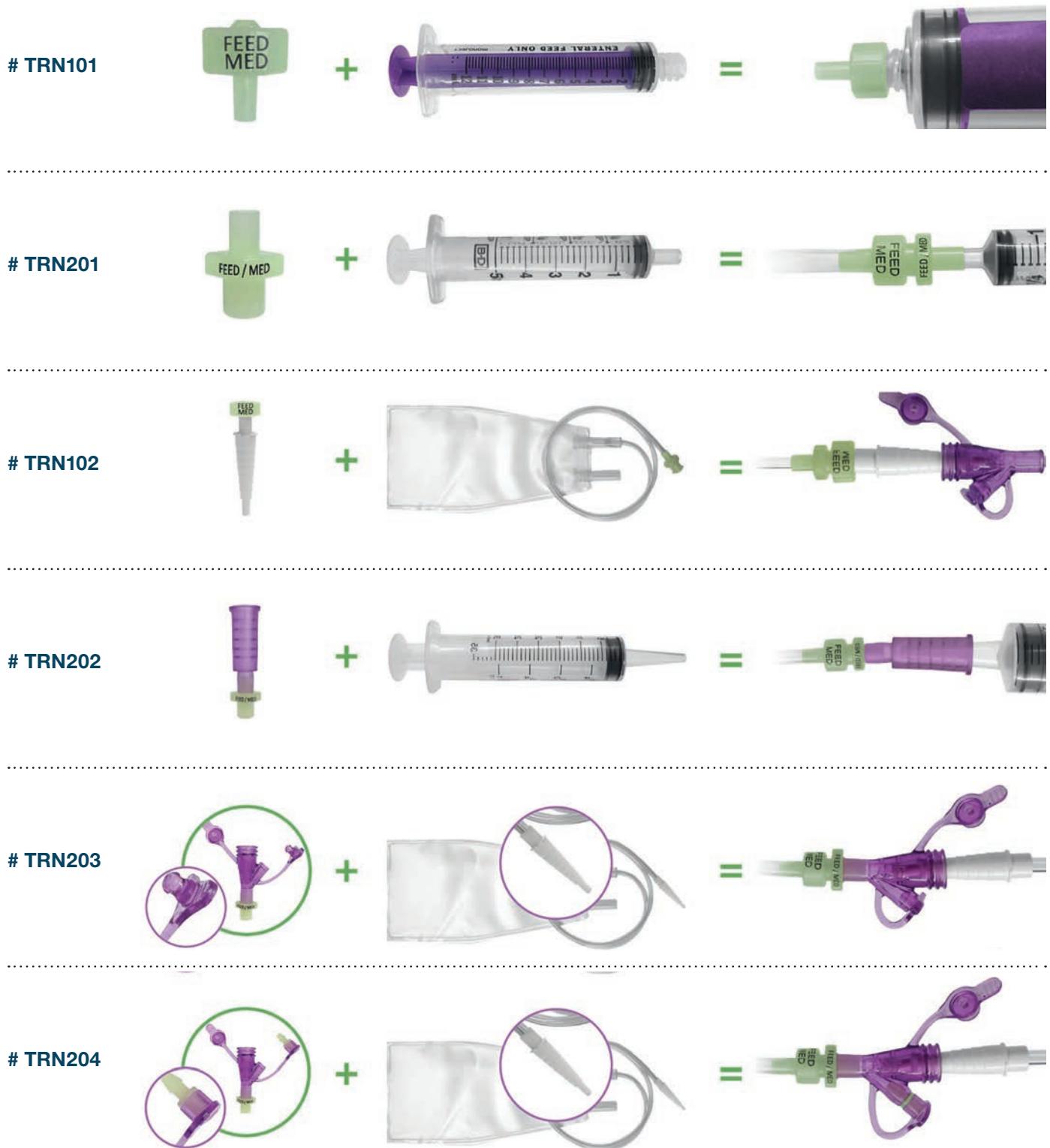

MiniACE® Button


Sonde für antegrade Darmspülungen




Der MiniACE® Button ist der einzige Balloon Button mit FDA Zulassung für das **A**ntegrade **C**ontinence **E**nema (ACE) Verfahren. Das Produkt ist für die Appendikostomie (Malone-Verfahren) und die Zökostomie approbiert, wie auch für die Erstanlage. Mit seiner überlegenen Dichtigkeit und einem sicheren Halt im Stoma überzeugt der MiniACE® Button Anwender und Patienten gleichermaßen.



Antegrade = Vorwärts gerichtet

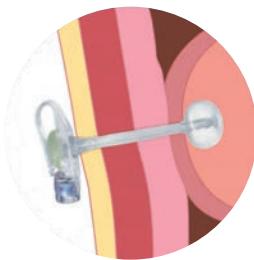

Caecum = Stuhlkontrolle

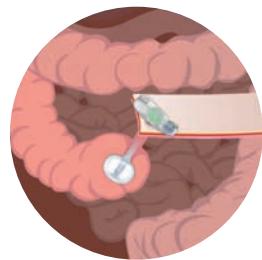

Enema = Spülung des Kolons

Zökostomie: Chirurgische Anlage einer künstlichen Verbindung zwischen Caecum (Blinddarm) und Bauchdecke.

Appendikostomie: Chirurgische Anlage einer künstlichen Verbindung zwischen Appendix (Wurmfortsatz des Blinddarms) und Bauchdecke.



Sichere Verbindung

Verschiedene Größen

Besonders weich

Vorteile des MiniACE® Button

- **Erhöhte Sicherheit**

Button liegt fest im Stoma, ungewolltes Herausziehen wird vermieden

- **Reduziert Undichtigkeiten**

Der konische Schaft zusammen mit dem apfelförmigen Balloon reduziert das Risiko von Undichtigkeiten signifikant

- **Anti-Rückfluss-Ventil**

Verhindert den Rückfluss von Spülflüssigkeiten und Sekret

- **Silikon von höchster medizinischer Qualität**

Besonders hautfreundlich und einfach zu reinigen

- **Bessere Passform**

Durch die Vielfalt an Größen


- **Einfaches Austauschen**

Sedierung, Röntgen oder invasiver Eingriff nicht nötig



Konkurrenzprodukt

MiniACE®

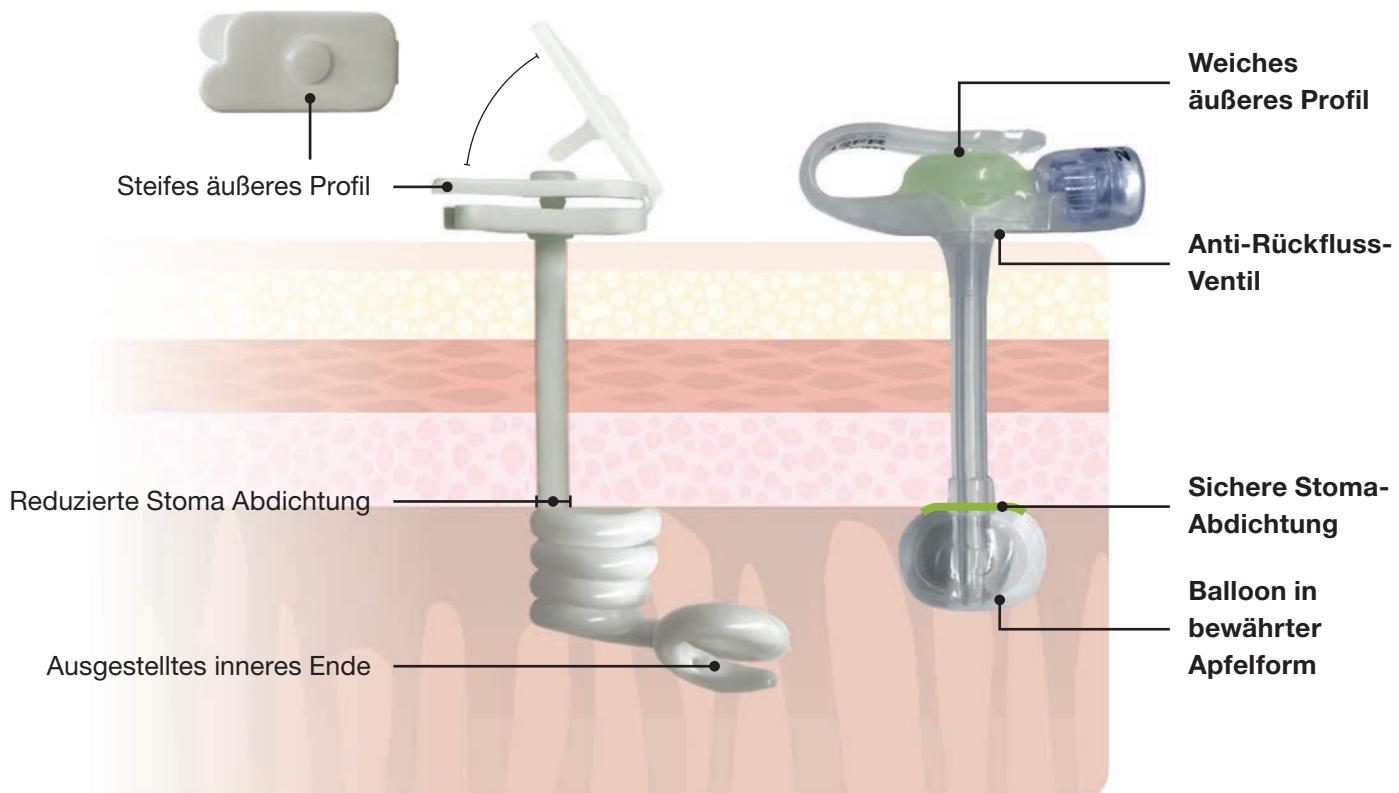


Größen und Artikelnummern

| 10 French | | 12 French | | 14 French | |
|---|-------------|---|-------------|---|-------------|
| Füllmenge Min. 1 ml Empfohlen 1,5 ml Max. 2 ml | | Füllmenge Min. 2 ml Empfohlen 2,5 ml Max. 3 ml | | Füllmenge Min. 3 ml Empfohlen 4 ml Max. 5 ml | |
| Länge (cm) | Art.-Nr. | Länge (cm) | Art.-Nr. | Länge (cm) | Art.-Nr. |
| 0,8 | ACE-1008-I | 0,8 | ACE-1208-I | 0,8 | ACE-1408-I |
| 1,0 | ACE-1010-I | 1,0 | ACE-1210-I | 1,0 | ACE-1410-I |
| 1,2 | ACE-1012-I | 1,2 | ACE-1212-I | 1,2 | ACE-1412-I |
| 1,5 | ACE-1015-I | 1,5 | ACE-1215-I | 1,5 | ACE-1415-I |
| 1,7 | ACE-1017-I | 1,7 | ACE-1217-I | 1,7 | ACE-1417-I |
| 2,0 | ACE-1020-I | 2,0 | ACE-1220-I | 2,0 | ACE-1420-I |
| 2,3 | ACE-1023-I | 2,3 | ACE-1223-I | 2,3 | ACE-1423-I |
| 2,5 | ACE-1025-I | 2,5 | ACE-1225-I | 2,5 | ACE-1425-I |
| 2,7 | ACE-1027-I | 2,7 | ACE-1227-I | 2,7 | ACE-1427-I |
| 3,0 | ACE-1030-I | 3,0 | ACE-1230-I | 3,0 | ACE-1430-I |
| 3,5 | ACE-1035-I | 3,5 | ACE-1235-I | 3,5 | ACE-1435-I |
| 4,0 | ACE-1040-I | 4,0 | ACE-1240-I | 4,0 | ACE-1440-I |
| 4,4 | ACE-1044-I | 4,4 | ACE-1244-I | 4,4 | ACE-1444-I |
| 5,0 | ACE-1050-I | 5,0 | ACE-1250-I | 5,0 | ACE-1450-I |
| 5,5 | ACE-1055-I | 5,5 | ACE-1255-I | 5,5 | ACE-1455-I |
| 6,0 | ACE-1060-I | 6,0 | ACE-1260-I | 6,0 | ACE-1460-I |
| 6,5 | ACE-1065-I | 6,5 | ACE-1265-I | 6,5 | ACE-1465-I |
| 7,0 | ACE-1070-I | 7,0 | ACE-1270-I | 7,0 | ACE-1470-I |
| 8,0 | ACE-1080-I | 8,0 | ACE-1280-I | 8,0 | ACE-1480-I |
| 9,0 | ACE-1090-I | 9,0 | ACE-1290-I | 9,0 | ACE-1490-I |
| 10,0 | ACE-10100-I | 10,0 | ACE-12100-I | 10,0 | ACE-14100-I |

Jedem Artikel liegt folgendes Spülset bei:

1x 2-1221-ISOSAF (ENFit®-Anschluss, rechtwinklig, 30 cm)

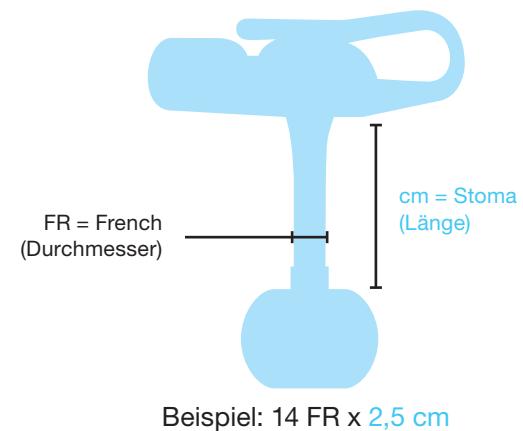


Die neuen 10 FR Größen erleichtern den Wechsel vom aktuellen Produkt zum MiniACE® Button mit nur minimaler Dilatation.

Passende Spülsets

Die folgenden Spülsets passen für alle Größen des MiniACE® Buttons:

| Konnektor | Anschluss | | |
|---|-------------|---------------|---------------------|
| | | ENFit® | Bolus (kein ENFit®) |
| Rechtwinklig  | 30 cm (12") | 2-1221-ISOSAF | 2-1221 |
| | 60 cm (24") | 2-2421-ISOSAF | 2-2421 |


 Verlängerung die jedem MiniACE® Button beigelegt ist

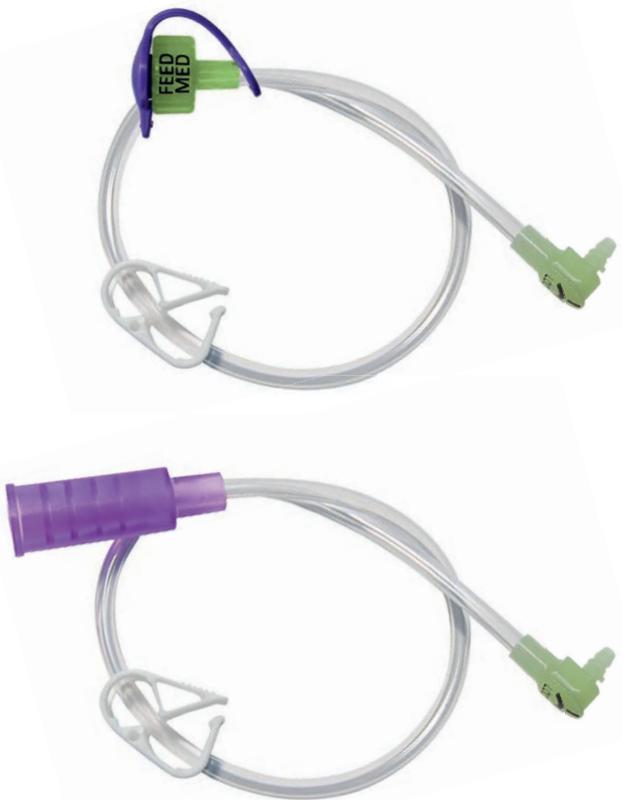

Sichere Verbindung mit den Spülsets

Die Spülsets vom MiniACE® sitzen 10 x so fest wie beim Konkurrenzprodukt.*

* Basierend auf internem Test

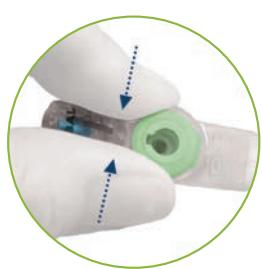

Stützen



Ausrichten und Einsetzen



Drehen



Verschließen



Spülen

TLC® Retraktorsysteme

Produktvielfalt für operative Eingriffe



Die selbsthaltenden, anpassbaren **TLC® Retraktorsysteme** ermöglichen ein sanftes Zurückziehen und Fixieren von empfindlichem Weichgewebe von der Operationsfläche, sodass die volle Aufmerksamkeit der Operation selbst gewidmet werden kann. Somit können Eingriffe durchgeführt werden, ohne auf manuelles Zurückziehen des Gewebes oder kurzzeitige Haltenähte / Haltefäden zurückgreifen zu müssen.

Im Vergleich zur manuellen Fixierung verbessert ein **TLC® Retraktorsystem** die Visualisierung, Organisation und Kontrolle der Operationsstelle (Operationssitus) erheblich.



Die Platzierung

Kein Herausrutschen der Wundhaken

Die gerippten Wundhaken sorgen für einen sicheren Halt und verhindern ein Herausrutschen selbst bei Nässe.



Erhöhte Kontrolle

Dank der gleichmäßigen Spannung hat man eine bessere Kontrolle des Gewebes, da der Retraktorrahmen genau um die zu operierende Stelle positioniert wird.



Schnelle Platzierung

Die beweglichen Gelenke können im Handumdrehen eingestellt und der Anatomie des Patienten angepasst werden. Die TLC® Retraktorrahmen haben keine störenden Schrauben zum Verstellen.




Flaches Profil

- Erhöhte Kontrolle und Exposition selbst kleinster Operationsflächen
- Freier und ungehinderter Zugang zur Operationsstelle
- Der Einweg-Retraktorrahmen ist kostengünstig und reduziert die Arbeits-, Reinigungs- und Sterilisationskosten

Während der gesamten Operation wird die Spannung gehalten.

Große Auswahl

Um ein breites Spektrum an chirurgischen Eingriffen abzudecken, sind die TLC® Retraktorrahmen und -haken in verschiedenen Formen und Größen erhältlich. Diese Vielfalt gibt die Freiheit, andere Aufgaben zu erledigen.

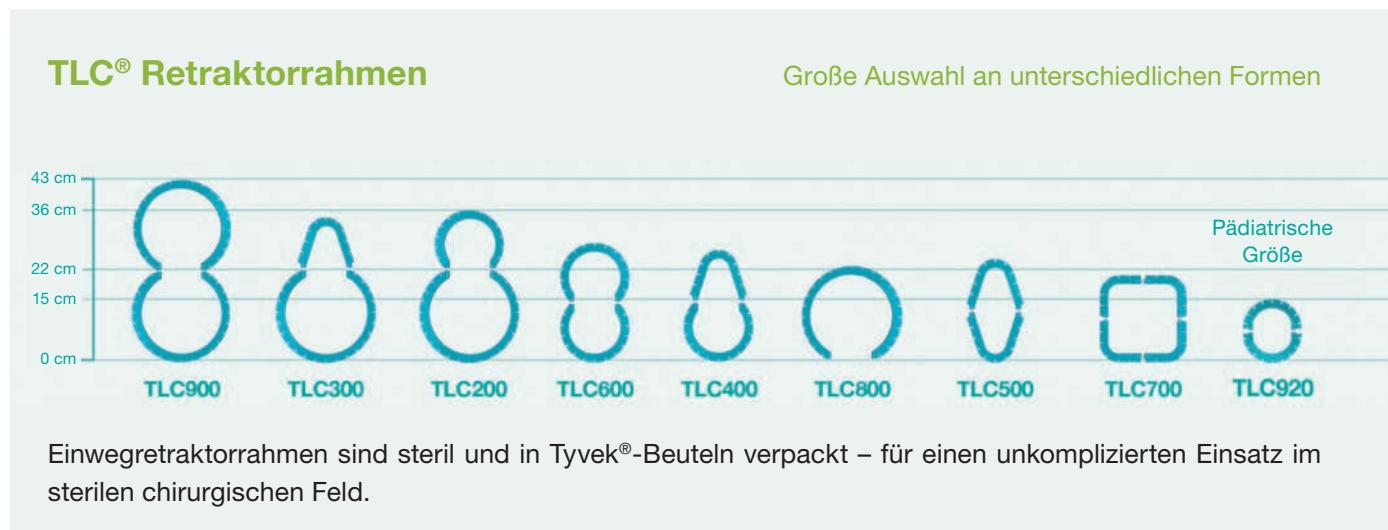

TLC® Wundhaken


- Die Haken sind steril verpackt.
- Bei der VE à 50 Stück ist jeder Haken einzeln steril verpackt.

| Wundhaken | Menge/VE | Artikelnummer |
|------------------------|----------|---------------|
| Scharf (3 mm) | 4 | TLC090-4 |
| | 8 | TLC090-8 |
| | 50 | TLC090-50 |
| Scharf (5 mm) | 4 | TLC110-4 |
| | 8 | TLC110-8 |
| | 50 | TLC110-50 |
| Stumpf (5 mm) | 4 | TLC100-4 |
| | 8 | TLC100-8 |
| | 50 | TLC100-50 |
| Stumpf (12 mm) | 4 | TLC150-4 |
| | 8 | TLC150-8 |
| | 50 | TLC150-50 |
| 3-Finger-Harke (20 mm) | 4 | TLC203-4 |

Wilson™ Retraktor-System

Präzises, selbsthaltendes Wundspreizersystem
für urologische Eingriffe, wie z.B. Penisprothesen

SICHER

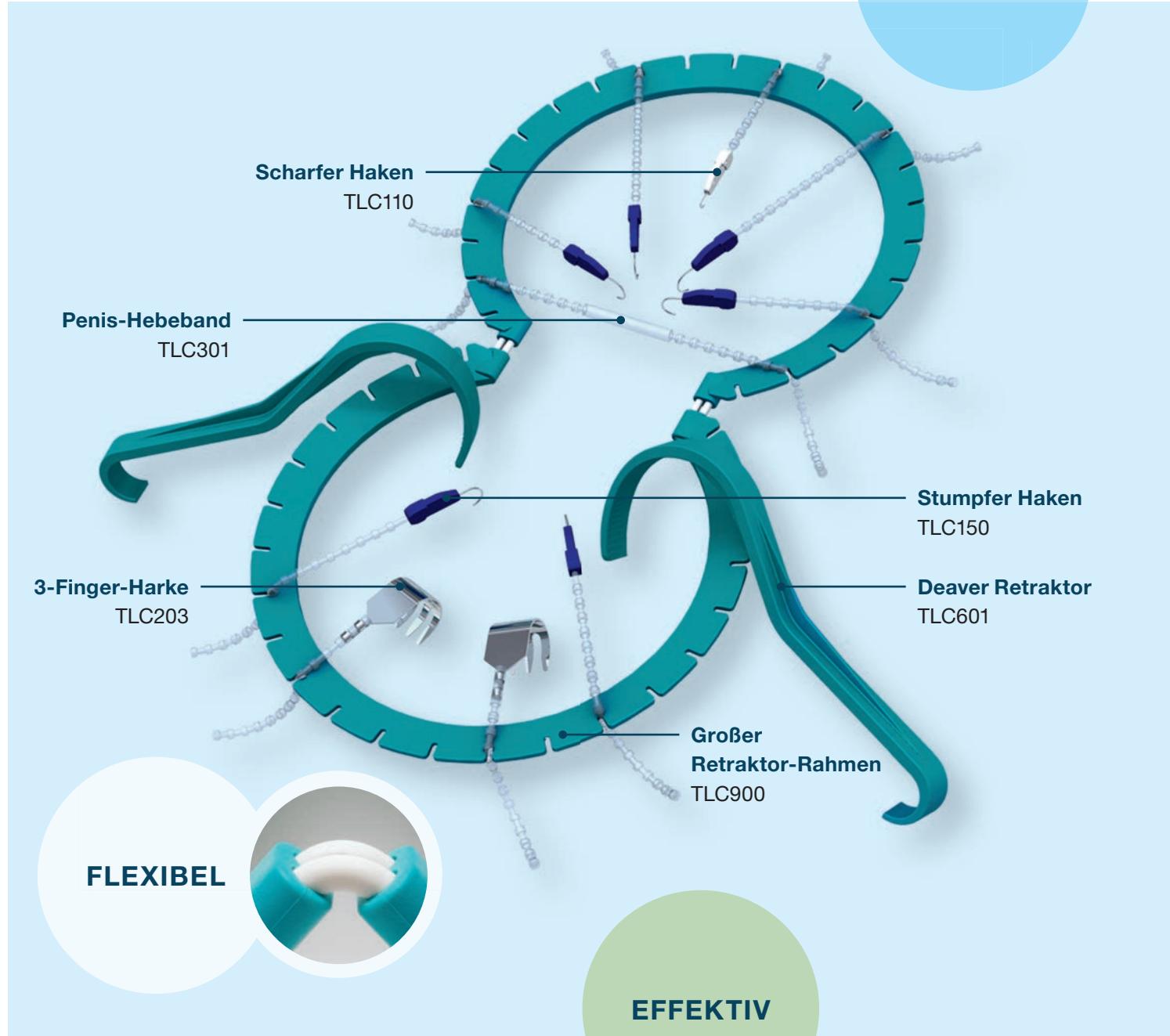

Das **Grundset TLC5011** beinhaltet folgende Produkte:

- **TLC900** Großer Rahmen
- **TLC110** Haken scharf, 5 mm (1 Stk.)
- **TLC150** Haken stumpf, 12 mm (6 Stk.)
- **TLC601** Deaver Retraktor (2 Stk.)
- **TLC203** 3-Finger-Harke (2 Stk.)
- **TLC301** Penis-Hebeband (1 Stk.)


Weitere Sets mit
unterschiedlichem
Inhalt erhältlich.
Fragen Sie uns!

Remora®


Rauch- und Flüssigkeitsabsauger

Hochfrequenz-Elektrochirurgiegeräte werden gerne zum Schneiden und Koagulieren verwendet. Diese Verfahren erzeugen allerdings **Rauch, der zu gesundheitsschädlichen Auswirkungen** beim exponierten OP-Personal sowie auch beim Patienten führen kann. Der Rauch kann Bakterien, Viren und andere Toxine enthalten. Die Zusammensetzung variiert stark je nach Verfahren sowie der Art des Eingriffes. **Die Absaugung sowohl von chirurgischen Rauchgasen als auch Flüssigkeiten an der Entstehungsstelle direkt, ist die technisch sinnvollste Schutzmaßnahme.**

Der Remora® Rauch- und Flüssigkeitsabsauger ist mit allen üblichen Elektroden kompatibel und kann mit den meisten OP-Absaugungen mit Filter verbunden werden. Das Gerät hat ein geringes Profil und schränkt somit weder die Beweglichkeit der Elektrode noch die Sicht des Chirurgen ein. Zudem ist der Remora in der Anwendung leise und einfach zu bedienen.

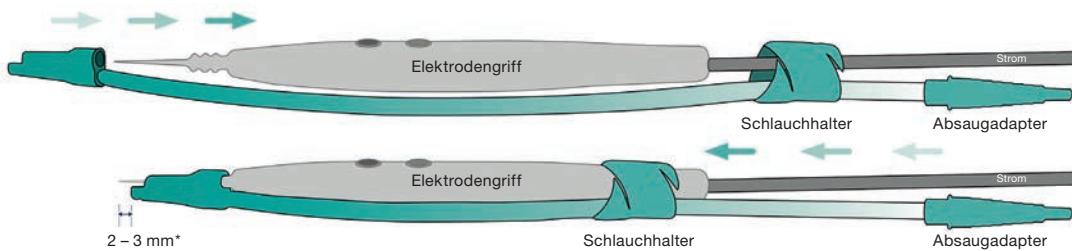

* Die Nadelspitze sollte nicht mehr als 3 mm aus dem Remora® herausragen, um eine optimale Absaugung zu ermöglichen.

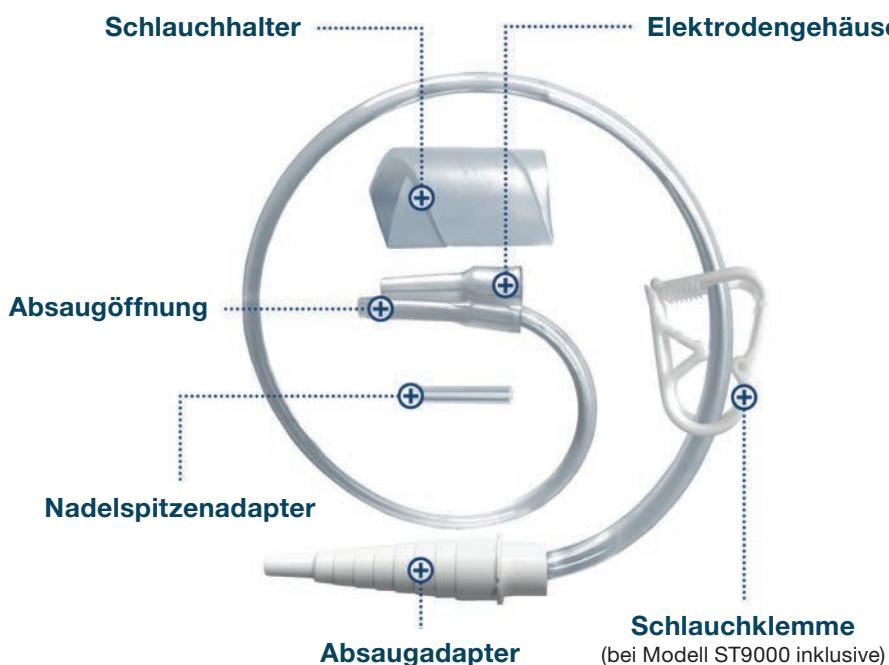

Drei Löcher an der Absaugöffnung entfernen Rauch und Flüssigkeiten gleichzeitig und verhindern Verstopfungen. Die Elektrodenspitze wird isoliert und die Absaugung sitzt unter dem eigentlichen Stift.

Vorteile

- Die Gase werden sofort am Ort der Entstehung abgesaugt
- Rauch und Flüssigkeiten werden gleichzeitig abgesaugt
- Verbesserte Sicht auf die Operationsstelle
- Auch für Operationen in tiefen Hohlräumen geeignet
- Aus nachgiebigem Material, schützt empfindliches Gewebe
- Die Entfernung von Flüssigkeit kann zu einer verbesserten Leitfähigkeit der Instrumente führen
- Für alle Klingen- oder Nadelelektroden geeignet



Remora® ist für verschiedene Elektroden geeignet (Klinge-/Nadel-/etc.)

Den Remora® Rauch- und Flüssigkeitsabsauger gibt es in zwei Größen:



ST9000 – Remora®

inkl. Schlauchklemme



ST9100 – Remora® Micro

Für schwierige, detailreiche Verfahren (enge Operationsstelle)



Patente: <https://www.appliedmedical.net/patents/>

Geschützte Marken: <https://www.appliedmedical.net/trademarks/>

Tyvek® ist eine registrierte Marke von DuPont. ENFit® eine registrierte Marke von GEDSA.

AMT Kreienbaum GmbH

Robert-Koch-Straße 9

40764 Langenfeld

Tel +49 2173 8930846

Fax +49 2173 8930847

info@amt-kreienbaum.de

www.amt-kreienbaum.de